


Produits d'hygiène et  
aides médicales pour la  
vie quotidienne

 etac®



# Créer des possibilités dans le monde entier

Le groupe Etac possède des filiales dans 8 pays et des distributeurs dans plus de 45 pays à travers le monde.

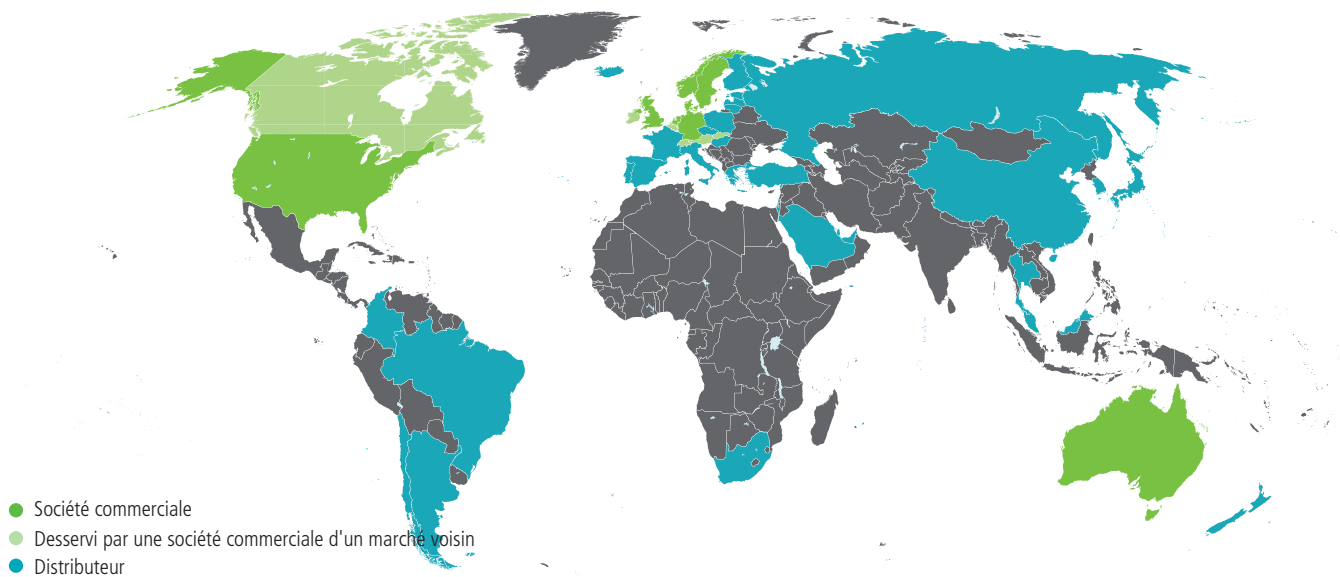

**Etac Education**

Apprenez-en davantage sur nos produits et améliorez vos capacités d'évaluation ! Nous proposons des formations sur nos produits, des applications cliniques et des séminaires dédiés à nos produits. Nos responsables de formation sont des spécialistes qui travaillent depuis plusieurs d'années dans le domaine clinique.

# Des produits garantissant l'intégrité et la sécurité

Une porte de salle de bain est généralement fermée. Lorsque nous nous douchons ou utilisons les toilettes, nous tenons à notre intimité.

## La salle de bain est aussi un espace où le risque d'accident est élevé.

Il est possible d'améliorer la sécurité dans cette pièce, par exemple, en s'asseyant lors de la douche ou encore en utilisant des accoudoirs et une planche de bain pour des transferts sans danger. C'est pourquoi le tabouret de douche, le surélévateur de toilettes et la planche de bain doivent être fonctionnels et sûrs.

Pour Etac, fonctionnalité et sécurité vont de pair. Dès les années 1970, nous avons impliqué des ergothérapeutes et des utilisateurs potentiels dans le développement de nos produits. Ceux-ci sont rigoureusement testés et contrôlés afin de s'assurer qu'ils sont conformes aux réglementations en matière de sécurité. Avec les produits pour salles de bain d'Etac, vous êtes en sécurité dès que vous fermez la porte.



*Pour plus d'informations sur notre garantie de 5 ans, consultez également le site [www.etac.com](http://www.etac.com).*

## Le développement de produits haut de gamme

Lors d'une visite chez un homme âgé souffrant de rhumatismes et vivant seul à la campagne, une ergothérapeute a senti une odeur désagréable provenant des chaussettes du vieil homme. Celui-ci avait gardé les mêmes chaussettes pendant quatre jours parce qu'il avait de grosses difficultés à changer de paire sans se faire aider.

L'ergothérapeute lui a présenté un enfile-bas en plastique, qu'il suffit de placer à l'intérieur de la chaussette en le pliant. Le vieil homme s'est vite découragé. Déterminée, l'ergothérapeute a demandé à son frère, concepteur industriel, de relever le défi : concevoir un produit plus simple. Leur réflexion commune a abouti à la création d'un modèle long en forme de cône fabriqué en nylon lisse et muni sur le haut d'une poignée en plastique. Le vieil homme pouvait désormais changer facilement de chaussettes tous les jours.

Pour en savoir plus sur l'enfile-bas Etac Socky, reportez-vous à la page 70. Visionnez nos tutoriels sur ce produit sur [www.etac.com](http://www.etac.com).



# Collection Etac S.P.A.

Comptez sur nous. Restez vous-même.


Pour beaucoup d'entre nous, il nous arrive parfois d'avoir besoin d'aide, que ce soit parce que nous vieillissons ou pour une autre raison. Nous ne sommes plus aussi souple qu'avant et nous ne pouvons plus bouger comme nous avons l'habitude de le faire.

La collection Etac S.P.A. comprend un accoudoir de toilettes Rex, une barre d'appui Flex et un siège de douche Relax.

Ces trois produits ont une fonction différente, mais, combinés, ils vous offrent la possibilité de ne pas modifier vos habitudes.

Etac S.P.A. (Safe Personal Assistance, aide individuelle sécurisée)

Pour en savoir plus sur ces produits, reportez-vous aux pages 8, 10 et 42.

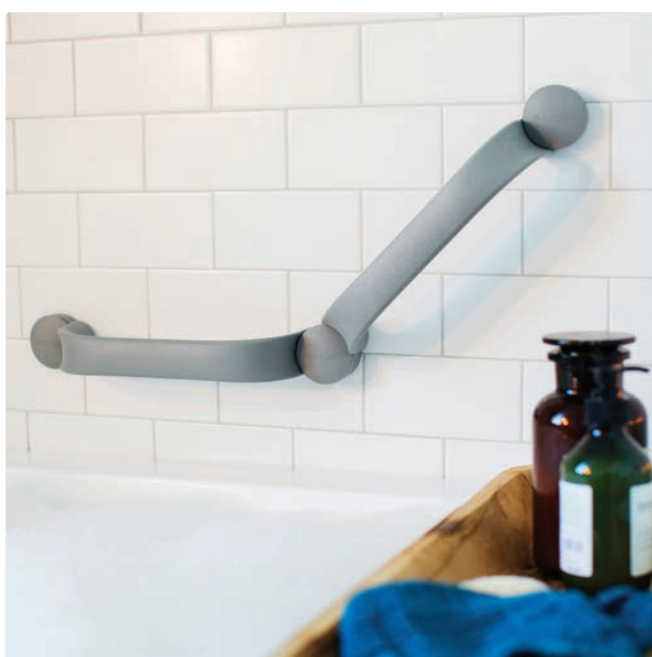

## Etac Clean

À présent disponible avec un nouveau design et dans de nouvelles couleurs

La chaise de douche et de toilettes Etac Clean bat des records de vente depuis près de 20 ans. Notre engagement et notre savoir confirment que nous mettons tout en œuvre pour continuer à nous améliorer.

Bénéficiant d'une nouvelle conception, la chaise Clean est encore plus simple à nettoyer et à maintenir propre. Dorénavant, elle se décline en deux nouvelles couleurs : vert lagon et blanc.

La chaise Clean est toujours la même, elle a seulement été améliorée afin d'être encore plus hygiénique. Une chaise Clean encore plus propre.

Pour en savoir plus sur la gamme de produits Etac Clean, reportez-vous aux pages 20 à 27.

## TABLE DES MATIÈRES

### Sous la douche

Siège de douche Etac Relax .....	8
Barre d'appui Etac Flex .....	10
Tabourets de douche Etac Edge, Easy et Smart	12
Tabouret/chaise de douche Etac Swift.....	14
Chaise de douche pliante Etac Rufus .....	17
Chaise de douche Etac Rufus Plus.....	17

### Douche et toilettes

Etac Clean .....	20
Chaise à hauteur réglable Etac Clean .....	22
Etac Clean Comfort .....	23
Etac Clean 60 cm .....	25
Chaise de douche et de toilettes	
Etac Swift Mobile.....	28
Etac Swift Mobile XL 160.....	30
Etac Swift Mobile 60 cm .....	31
Chaise Etac Swift Mobile Tilt.....	32
Etac Swift Mobile Tilt XL 160 .....	34
Etac Tripp Tilt.....	38

### Toilettes

Fauteuil 3 en 1 Etac Swift Commode .....	42
Surélévateur de toilettes sur pied Etac Swift....	43
Siège de toilettes sur pied Etac Kaskad .....	44
Surélévateur de toilettes Etac Cloo .....	45
Etac Hi-Loo avec supports.....	46
Surélévateur fixe Etac Hi-Loo .....	47
Accoudoirs de toilettes Etac Supporter .....	48
Accoudoirs de toilettes Etac Supporter	
Régable.....	49
Accoudoir de toilettes Etac Optimal.....	51
Accoudoir de toilettes Etac Rex.....	52
Accoudoir de toilettes Etac Optima.....	54

### Bain

Planche de bain Etac Rufus Plus .....	58
Planche de bain Etac Fresh.....	59
Chaise de bain Etac Rufus .....	60
Tabouret de salle de bain Etac Stapel .....	60

### Aides médicales pour la vie quotidienne

Soins corporels avec Etac Beauty .....	64
Pince à papier toilettes Etac Torkel.....	66
Pincettes de préhension Etac Aktiv.....	68
Enfile-bas Etac Socky .....	70
Enfile-boutons Etac Butler.....	70
Stylo Etac Contour et poignée	
Tourne-boutons Etac Uni.....	73
Couteaux ergonomiques Etac Relieve .....	74
Planche de préparation culinaire Etac Fix.....	76
Planche à découper Etac Cut .....	76
Couverts Etac Light.....	78
Verre, gobelet et assiette Etac Tasty .....	80
Aides de table Etac Feed.....	81



Pour plus d'informations  
sur notre garantie de 5 ans,  
consultez également le site  
[www.etac.com](http://www.etac.com).



## Sous la douche

Se doucher constitue l'un des petits plaisirs quotidiens. Etac fournit des solutions procurant une grande sensation de confort et de sécurité. Ces produits sont utilisés dans des environnements humides où la durabilité et la qualité sont des facteurs clés. Tous nos produits sont conçus dans des matériaux durables qui résistent aux tensions, et sont garantis 5 ans.

# Siège de douche Etac Relax

Un design scandinave pour une salle de bain moderne.

## L'importance accordée aux détails

Etac Relax a été conçu pour associer le plaisir de la douche et la sécurité. La conception, la fonctionnalité et la sécurité sont des valeurs essentielles que l'on retrouve ici dans un siège de douche mural discret. La forme du siège permet de varier les positions assises, offrant ainsi une meilleure accessibilité. Toujours à portée de main, il peut également être relevé pour gagner de la place.

## Adapté à vos besoins

Etac Relax est décliné en deux couleurs et en six modèles, afin de pouvoir être personnalisé.



### Siège de douche Etac Relax

- Blanc	81703010
- Blanc, avec accoudoirs	81703020
- Blanc, avec pieds d'appui	81703030
- Blanc, avec accoudoirs et dossier	81703060
- Blanc, avec accoudoirs et pieds d'appui	81703040
- Blanc, avec accoudoirs, dossier et pieds d'appui	81703050
- Gris volcan	81708000
- Gris volcan, avec accoudoirs	81708010
- Gris volcan, avec pieds d'appui	81708020
- Gris volcan, avec accoudoirs et dossier	81708050
- Gris volcan, avec accoudoirs et pieds d'appui	81708030
- Gris volcan, avec accoudoirs, dossier et pieds d'appui	81708040

### Couleur

Blanc, gris volcan

### Poids maximal de l'utilisateur

Avec/sans pieds d'appui : 150/125 kg

### Matériaux

Siège : polypropylène

Accoudoirs : polypropylène et TPE

Béquilles : aluminium et acier inoxydable

Embouts : TPE



Nettoyer le produit avec un agent nettoyant sans solvant (pH 5-9) ou une solution désinfectante à 70 %. Décontamination possible à 85 °C maximum si nécessaire.






## Caractéristiques



### Siège large et stable

Siège large et stable lorsqu'il est déplié et très discret une fois replié.

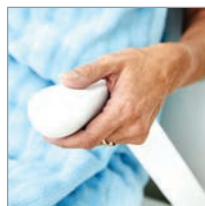

### Accoudoirs faciles à saisir

La forme et la matière des accoudoirs rabattables offrent une prise sûre et sécurisée.




### Design fonctionnel

La forme du siège permet de varier les positions assises, offrant ainsi une meilleure accessibilité.



### Installation facile

Avec trois points de fixation uniquement, l'installation est à la fois rapide et aisée (fixations non incluses).

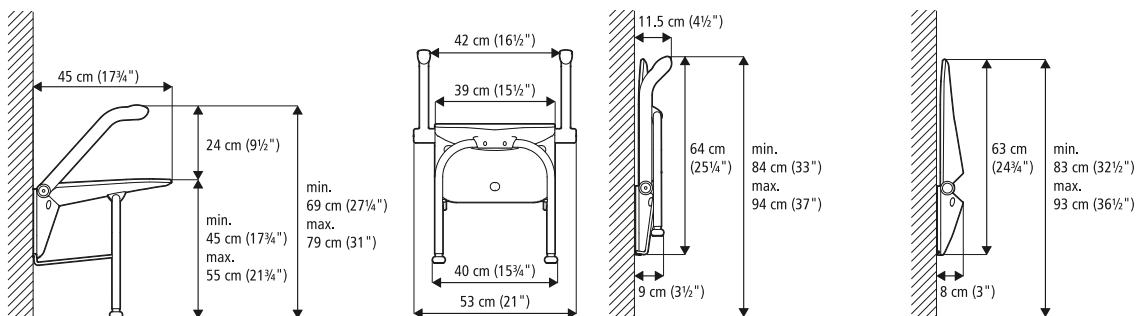

Vis et pièce de fixation non incluses. Doit être monté sur un mur à portance suffisante uniquement. Veuillez à utiliser les fixations adéquates. L'installation du siège doit être réalisée par une personne qualifiée. Pour plus d'informations, consultez le manuel d'utilisation d'Etac Relax sur [www.etac.com](http://www.etac.com).

## Accessoires



### Dossier, souple

Dossier souple réfléchissant la chaleur. Fixé au mur à l'aide de velcro. Blanc 81704060



### Pieds d'appui

Pour un meilleur équilibre et un poids inférieur ou égal à 150 kg. Hauteur réglable entre 45 et 55 cm. Blanc 81704050 Gris volcan 81708070



### Kit de vis

Pour le montage sur des murs en bois/contreplaqué ou en béton. Ce kit contient des vis et des chevilles. 84006130

84006130

# Barre d'appui Etac Flex

Conception innovante génératrice de possibilités.

NOUVEAU  
PRODUIT !

## Barres d'appui modulaires flexibles

La barre d'appui Etac Flex représente la solution idéale pour une assistance dans la salle de bains. Modulaire et flexible, la poignée se règle facilement pour s'adapter à la salle de bain et aux utilisateurs. Son design 100% scandinave s'harmonise avec celui d'autres produits, et se décline en deux coloris (blanc et gris).

## Une assistance pour les bons et les mauvais jours

Le matériau utilisé ainsi que la forme et la surface de la barre d'appui vous assurent une prise stable, même si les poignées ou vos mains sont humides. La forme triangulaire et l'emplacement pour le pouce confèrent une impression de sécurité accrue.



*Etac Flex s'intègre parfaitement à votre salle de bain.*

### Montage d'Etac Flex à l'aide de vis

- Barre d'appui Flex 30 cm blanche	81707110
- Barre d'appui Flex 60 cm blanche	81707120
- Barre d'appui Flex 90 cm blanche	81707130
- Extension Flex 30 cm blanche	81707110
- Barre d'appui Flex 30 cm grise	81707310
- Barre d'appui Flex 60 cm grise	81707320
- Barre d'appui Flex 90 cm grise	81707330
- Extension Flex 30 cm grise	81706310

### Montage d'Etac Flex avec de la colle

- Barre d'appui Flex 30 cm blanche	81707210
- Barre d'appui Flex 60 cm blanche	81707220
- Barre d'appui Flex 90 cm blanche	81707230
- Extension Flex 30 cm blanche	81706210
- Barre d'appui Flex 30 cm grise	81707410
- Barre d'appui Flex 60 cm grise	81707420
- Barre d'appui Flex 90 cm grise	81707430
- Extension Flex 30 cm grise	81706410

### Poids

0,35 kg par unité

### Poids maximal de l'utilisateur

100 kg

### Matériau

Polypropylène

### Couleur

Blanc et gris volcan



Nettoyer le produit avec un agent nettoyant sans solvant (pH 5-9) ou une solution désinfectante à 70 %. Décontamination possible à 85 °C maximum si nécessaire.



*Remarque : si vous souhaitez ajouter une ou plusieurs barre(s) d'appui à une combinaison de 30 cm, 60 cm ou 90 cm, vous devez utiliser les extensions Etac Flex.*

## Caractéristiques



### Facile à régler

Le montage du système modulaire peut être personnalisé.



### Prise en main sécurisée

La forme et la surface bien conçues de la barre d'appui assurent une prise stable, même si vos mains sont humides.



### Créer des possibilités

Vous pouvez fixer autant de barres d'appui que vous souhaitez et choisir l'angle d'inclinaison qui vous convient. Les possibilités sont infinies.



### Deux modes de fixation

La barre d'appui peut être fixée avec des vis ou de la colle. L'utilisation de colle est particulièrement recommandée aux utilisateurs qui ne peuvent pas ou ne veulent pas faire de trous dans les murs de leur salle de bain.



Les barres d'appui Etac Flex vous offrent un large choix de positionnement. Vous pouvez régler l'angle entre  $-90^\circ$  et  $+90^\circ$  selon vos besoins.



# Tabourets de douche Etac Edge, Easy et Smart

Une gamme complète de petits tabourets de douche pratiques. Tous les tabourets sont munis de contours d'assise souples et d'une surface antidérapante agrémentée de trous de drainage ovales. Ces caractéristiques leur confèrent stabilité et confort. Le choix du tabouret dépend de l'espace disponible dans la douche, des fonctions souhaitées et des préférences de chacun.



## Tabouret de douche Etac Edge

Ce tabouret est parfaitement adapté à l'angle de la douche où les murs fournissent une stabilité arrière à l'utilisateur. Il peut également être placé dans l'autre sens pour former un siège en forme de selle, ce qui permet de soulager la pression sur une hanche douloureuse. Disponible en version basse également.

## Tabouret de douche Etac Easy

Facile à utiliser et à déplacer. Son assise ronde est toujours dans la bonne position. Également disponible avec un coussin pivotant.

## Tabouret de douche Etac Smart

Un confort maximal, que vous vous asseyiez sur le côté long ou le côté court. Il est proposé également avec un coussin pivotant ou en version basse, auquel cas il peut servir de siège de baignoire. Les tabourets bas sont idéaux lorsque des soins doivent être dispensés.



## Caractéristiques



### Facilement adaptable

Grâce à la fonction de verrouillage par bouton-poussoir, régler les pieds ou les retirer se fait facilement.



### Stabilité

Pour garantir la stabilité, les pieds sont orientés vers l'extérieur. Ainsi, plus le siège est haut, plus la surface est large.



### Facile et sûr

La forme ovale permet d'éviter que les pieds télescopiques ne tournent lors du réglage de la hauteur.



### Embouts avec prise ferme

Les embouts évacuent l'eau et s'adaptent parfaitement au sol.

## Accessoires



### Coussins d'assise

Modèle Edge : 81801132

Modèle Smart : 80209502

Modèle Easy : 80209501

Les coussins d'assise antidérapants donnent une sensation de chaleur instantanée et sont imperméables.



Les modèles Etac Easy et Smart avec coussin pivotant permettent de tourner facilement sans frottement. Amovible pour le nettoyage. Matériau : polyéthylène. Lavage à 60 °C max.

Tabourets de douche Etac	Gris	Bleu	Version basse, gris	Avec coussin pivotant, gris
Tabouret de douche Edge	81801010	81801030	81801040	
Tabouret de douche Easy	81901010	81901020		81901050
Tabouret de douche Smart	81951010	81951020	81951030	81951050

### Dimensions Edge

Largeur totale : 52 cm

Largeur du siège : 45 cm max. à la base

Hauteur du siège Edge : 42–57 cm

Hauteur du siège Edge version basse : 34,5–42 cm

### Dimensions Easy

Encombrement : 49,5–53,5 cm

Largeur du siège : 40 cm de diamètre

Hauteur du siège : 42–57 cm

### Dimensions Smart

Encombrement : 45,5–46,5 cm x 41–43 cm

Largeur du siège : 38–43 cm

Hauteur du siège : 42–57 cm

Hauteur du siège Smart version basse : 34,5–42 cm

### Matériaux

Siège : polypropylène

Pieds : aluminium, polyamide

Embouts : TPE

Coussin pivotant : polyéthylène

### Poids

Modèle Edge : 2,6 kg

Edge version basse : 2,4 kg

Modèle Easy : 2,8 kg

Modèle Smart : 3,2 kg

Smart version basse : 3 kg

### Couleurs

Gris

Bleu

### Poids max. de l'utilisateur

Modèles Smart et Easy : 150 kg

Modèle Edge : 130 kg



Nettoyer le produit avec un agent nettoyant sans solvant (pH 5-9) ou une solution désinfectante à 70 %. Décontamination possible à 85 °C maximum si nécessaire.



# Tabouret/chaise de douche Etac Swift

Swift est une gamme primée de tabourets/chaises de douche, conçue pour être simple et fonctionnelle. Le tabouret de douche de base peut facilement être transformé en une chaise de douche complète, en ajoutant des accoudoirs et un dossier.

## Stable sur tous les sols

Etac Swift présente un design unique qui s'ajuste aux sols irréguliers grâce à des pieds flexibles. Les embouts souples de grande qualité suivent la surface du sol et assurent une bonne stabilité. Toutes ces caractéristiques contribuent à la sécurité de l'utilisateur.

## Changements en fonction des circonstances

Le modèle Swift répond à divers besoins. L'utilisateur peut commencer par s'en servir comme tabouret de douche, puis, si les circonstances changent, y ajouter des accoudoirs et un dossier. Swift se positionne facilement à la hauteur requise au moyen des pieds télescopiques. Il peut être réglé un niveau plus bas à l'avant pour avoir un siège légèrement incliné et pouvoir se mettre debout avec moins de difficulté. Des coussins d'assise souples spécialement mis au point pour la douche sont disponibles pour plus de confort.

## Facile à manipuler

Swift est facile à manipuler en raison de son faible poids. Livré démonté, il s'assemble aisément, sans aucun outil. De plus, en aluminium et polypropylène, il est 100% anti-corrosion !



### Etac Swift

	Vert	Gris	Bleu
– tabouret de douche	81701010	81701410	81701510
– chaise de douche avec dossier et accoudoirs	81701030	81701430	81701530
– tabouret de douche version basse		81701450	
– chaise de douche version basse avec dossier et accoudoirs		81701460	

### Dimensions

Hauteur totale avec dossier : 80–95 cm  
Hauteur totale version basse avec dossier : 72,5–80 cm  
Largeur totale du tabouret : 54 cm  
Largeur totale avec les accoudoirs : 54,5 cm  
Profondeur totale : 50 cm  
Profondeur totale version basse : 46,5 cm  
Distance entre les accoudoirs : 45 cm  
Hauteur du siège : 42–57 cm  
Hauteur du siège version basse : 34,5–42 cm  
Surface du siège : 54 cm x 41 cm

### Matériaux

Polypropylène, aluminium


### Poids maximal de l'utilisateur

130 kg

### Poids

Tabouret de douche Swift : 3,1 kg  
Tabouret de douche Swift version basse : 2,9 kg  
Chaise de douche Swift : 4,7 kg  
Chaise de douche Swift version basse : 4,5 kg

### Couleurs

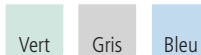

reddot



Nettoyer le produit avec un agent nettoyant sans solvant (pH 5-9) ou une solution désinfectante à 70 %. Décontamination possible à 85 °C maximum si nécessaire.

## Caractéristiques




**Facilement adaptable**  
Grâce à la fonction de verrouillage par bouton-poussoir, régler les pieds ou les retirer se fait facilement.



**Embouts avec prise ferme**  
Les embouts évacuent l'eau et s'adaptent parfaitement au sol.



**Possibilités de prise ferme**  
En l'absence d'accoudoirs, les ouvertures offrent une prise ferme.

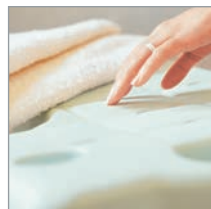

**Surface sûre**  
La surface de l'assise est antidérapante même lorsqu'elle est humide.



*Tabouret de douche Etac Swift*



*Chaise de douche Etac Swift avec dossier et accoudoirs*



*Chaise de douche Etac Swift version basse avec dossier et accoudoirs*

## Accessoires



**Dossier**  
Vert : 81701120  
Gris : 84005069  
Bleu : 84005071



**Coussin de dossier**  
Vert : 81701130  
Gris : 84005072  
Le coussin antidérapant apporte une sensation de chaleur instantanée et est imperméable. Matériau : polyéthylène. Lavage à 60 °C max.



**Porte-savon**  
Vert : 81701140  
Gris : 80209266  
Bleu : 81701340



**Coussin d'assise**  
Vert : 81701132  
Gris : 84005073  
Le coussin antidérapant apporte une sensation de chaleur instantanée et est imperméable. Matériau : polyéthylène. Lavage à 60 °C max.



**Paire d'accoudoirs**  
Verts : 81701110  
Gris : 84005074  
Bleus : 84005075





# Chaise de douche pliante Etac Rufus

## Pratique par son côté pliable

La chaise Rufus peut être pliée pour prendre moins de place lorsque vous ne l'utilisez pas ou que vous la transportez. Le siège est réglable en hauteur et peut être légèrement incliné vers l'avant afin que le patient puisse se lever plus facilement. Le dossier souple épouse la morphologie du dos.

*La chaise de douche Rufus est livrée démontée. Il suffit de la déplier, de fixer le siège et de régler la hauteur. La chaise est alors prête à être utilisée. Aucun outil n'est nécessaire.*



## Accessoire

Barre transversale de 60,5 cm  
80303034



### Description

Chaise de douche pliante Rufus 81208013

### Matériau

Siège : polypropylène  
Armature : tube en acier revêtu de peinture en poudre  
Sangle arrière : polyester

### Dimensions

Hauteur totale : 73–93 cm  
Largeur totale : 58 cm  
Profondeur totale : 44,5–47 cm, pliée : 12 cm  
Hauteur du siège : 45–60 cm  
Surface du siège : 41 cm x 40 cm  
Distance entre les accoudoirs : 52 cm

### Poids maximal de l'utilisateur

130 kg

Poids  
6,5 kg



Nettoyer le produit avec un agent nettoyant sans solvant (pH 5-9) ou une solution désinfectante à 70 %. Décontamination possible à 85 °C maximum si nécessaire.

# Chaise de douche Etac Rufus Plus

La chaise de douche Rufus Plus supporte un poids de 200 kg. Le dossier souple épouse la morphologie du dos. Pour que le patient puisse se mettre debout plus facilement, le siège peut être légèrement incliné vers l'avant. La chaise Rufus Plus, livrée démontée s'assemble facilement.



### Description

Chaise de douche Rufus Plus 81208015

### Matériaux

Armature : tube en acier revêtu de peinture en poudre  
Barre transversale : aluminium  
Assise : polypropylène avec tube en aluminium intégré  
Sangle arrière : polyester

### Dimensions

Hauteur totale : 89 cm  
Largeur totale : 62 cm  
Profondeur totale : 47 cm, pliée : 12 cm  
Hauteur du siège : 55,5 cm  
Surface du siège : 41 cm x 40 cm  
Distance entre les accoudoirs : 56 cm

### Poids maximal de l'utilisateur

200 kg

Poids  
6,5 kg



Nettoyer le produit avec un agent nettoyant sans solvant (pH 5-9) ou une solution désinfectante à 70 %. Décontamination possible à 85 °C maximum si nécessaire.



Pour plus d'informations sur  
notre garantie de 5 ans,  
consultez également  
le site [www.etac.com](http://www.etac.com).



## Douche et toilettes

La gamme Etac se compose d'une variété de chaises de douche et de toilettes mobiles. Ces produits ont tous été intelligemment conçus et sont dotés de plusieurs fonctions astucieuses qui simplifient les activités quotidiennes tant des utilisateurs que du personnel soignant.

# Chaise de douche Etac Clean

La chaise Etac Clean est sûre et ergonomique, aussi bien pour les utilisateurs que pour le personnel soignant. Résolument fonctionnelle, elle a été élaborée jusqu'au plus petit détail pour faire vivre à l'utilisateur une expérience positive et sans risque dans la salle de bain.

## Simple à intégrer et à manœuvrer

Etac Clean se dirige sans difficulté grâce à sa large poignée de poussée, dont la conception verticale intelligente garantit que la chaise Clean s'adapte parfaitement, même sur des toilettes suspendues. Par ailleurs, la chaise est ouverte à l'arrière pour faciliter l'accès.

## Repose-pieds confortable et pratique

Le repose-pieds est unique et coulisse sous la chaise lorsqu'il est inutilisé. La surface légèrement incurvée assure un confort optimal aux pieds, qui sont également protégés par la partie latérale du repose-pieds.

Tous les autres modèles Clean présentent les mêmes caractéristiques. Toutefois, ils sont munis de fonctionnalités supplémentaires pour répondre à d'autres besoins.



### Chaise de douche et de toilettes Etac Clean

44 cm, 4 roulettes verrouillables
49 cm, 4 roulettes verrouillables
49 cm, 2 roulettes verrouillables
49 cm, 4 roulettes verrouillables, avec dossier souple et support bassin
49 cm, 2 roulettes verrouillables, dossier souple
55 cm, 4 roulettes verrouillables, avec dossier souple et support bassin
55 cm, 4 roulettes verrouillables
55 cm, 2 roulettes verrouillables
55 cm, 2 roulettes verrouillables, dossier souple
60 cm, 2 roulettes verrouillables, avec cales de surélévation

### Blanche

80229269
80229270
80229273
80229286
80229305
80229287
80229271
80229274
80229306
80229275

### Vert lagon

80229209
80229210
80229213
-
-
-
80229211
80229214
-
80229215

### Chaise de douche et de toilettes Etac Clean - lot de deux

49 cm, 4 roulettes verrouillables, lot de deux
49 cm, 2 roulettes verrouillables, lot de deux
55 cm, 4 roulettes verrouillables, lot de deux
55 cm, 2 roulettes verrouillables, lot de deux

### Blanche

-
80229283
80229281
80229284

### Vert lagon

80229220
80229223
80229221
80229224

### Poids

44 cm : 13,5 kg
49 cm : 14 kg
55 cm : 14,5 kg
60 cm : 15 kg

### Matériaux

Châssis : tube en acier revêtu de peinture en poudre  
Assise/dossier : polypropylène  
Accoudoirs : polypropylène  
Repose-pieds : polypropylène  
Supports des roulettes : polyamide  
Roulettes verrouillables avec roulement à billes : polyamide/TPE

### Entretien

Nettoyer le produit avec un agent nettoyant sans solvant (pH 5-9) ou une solution désinfectante à 70 %. Décontamination possible à 85 °C maximum si nécessaire.



## Caractéristiques



### Fine mais spacieuse

La conception intelligente d'Etac Clean se traduit par une assise large et confortable, tout en conservant une chaise élégante et fine.



### S'adapte sur les toilettes

Grâce à sa poignée verticale, cette chaise est totalement adaptable, même sur des toilettes suspendues.



### Accès facile

La chaise est ouverte à l'arrière pour faciliter l'approche du personnel soignant au moment de la toilette.




### Repose-pieds

Le repose-pieds, pratique, souple et de forme arrondie, apporte un confort et une protection supplémentaires aux pieds de l'utilisateur.

## Accessoires

Découvrez notre vaste gamme d'accessoires en consultant la section « Accessoires pour tous les modèles Clean », page 26-27.

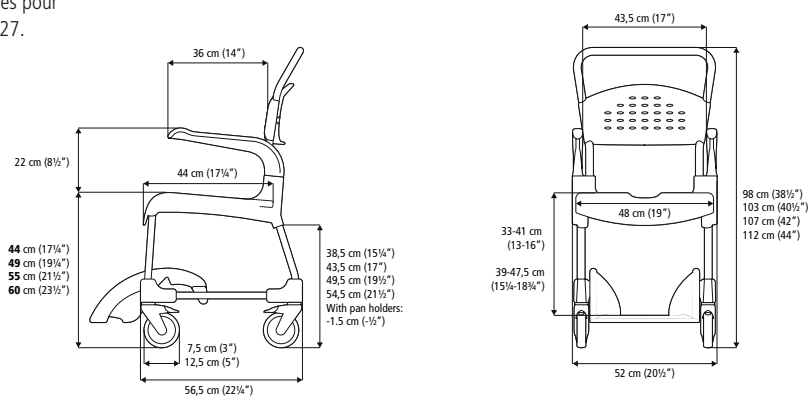

# Chaise à hauteur réglable Etac Clean

Cette chaise comporte non seulement toutes les caractéristiques du modèle de base, mais peut également se régler en hauteur.

## Réglage de la hauteur pour une parfaite adéquation


La hauteur de ce modèle Etac Clean peut être ajustée pour correspondre aux besoins de chaque utilisateur, par exemple, pour simplifier les transferts ou pour permettre l'installation sur les toilettes. Le réglage est simple et aucun outil n'est requis.

La chaise à hauteur réglable Etac Clean présente les mêmes avantages que les autres chaises de la gamme Clean, mais peut en sus être réglée en hauteur (de 47,5 à 60 cm) et s'accompagne d'un plus grand choix de repose-pieds et de repose-mollets.



## Accessoires

Découvrez notre vaste gamme d'accessoires en consultant la section « Accessoires pour tous les modèles Clean », page 26-27.

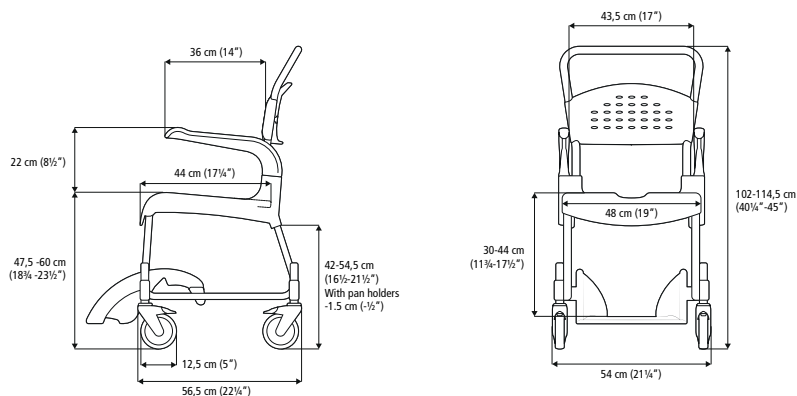

### Chaise à hauteur réglable Etac Clean

4 roulettes verrouillables,  
blanche

80229208

### Poids

14,2 kg

### Poids maximal de l'utilisateur

130 kg

### Matériaux

Châssis : tube en acier revêtu  
de poudre  
Assise/dossier : polypropylène  
Accoudoirs : polypropylène  
Repose-pieds : polypropylène  
Roulettes à roulements à billes :  
polyamide/TPE/tube en acier inoxydable  
Tubes de réglage de la hauteur  
sur les roulettes : acier inoxydable

### Entretien

Nettoyer le produit avec un agent  
nettoyant sans solvant (pH 5-9) ou  
une solution désinfectante à 70 %.  
Décontamination possible à 85 °C  
maximum si nécessaire.



# Etac Clean Comfort

Cette chaise possède tous les atouts de la chaise Etac Clean, avec un confort accru. Le siège, les accoudoirs et le dossier sont matelassés et procurent à l'utilisateur une assise douce et confortable.

## Douceur et chaleur pour ceux qui en ont besoin


Etac Clean Comfort accentue la sensation de bien-être pour les personnes qui souhaitent profiter dans leur salle de bain d'un confort et d'un soutien améliorés. L'utilisateur reste au chaud grâce au revêtement hydrofuge réfléchissant la chaleur. Le siège souple offre un appui confortable pour les cuisses et enveloppe l'utilisateur, qui ressent ainsi une impression de sécurité et de bien-être.

La chaise Etac Clean Comfort fournit des avantages identiques à ceux des autres chaises de la gamme Clean, mais est encore plus confortable.



## Accessoires

Découvrez notre vaste gamme d'accessoires en consultant la section « Accessoires pour tous les modèles Clean », page 26-27.

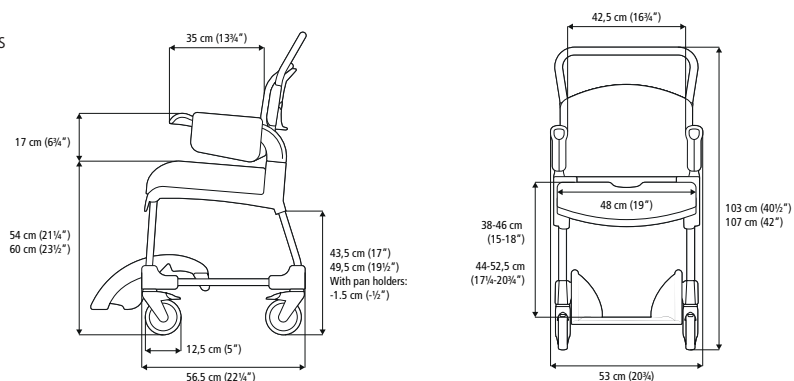

### Etac Clean Comfort

49 cm, avec housse Comfort, siège souple Comfort, 4 roulettes verrouillables, blanche  
55 cm, avec housse Comfort, siège souple Comfort, 4 roulettes verrouillables, blanche

80229298  
80229299

### Ouverture : profondeur x largeur

36,9 cm x 18,2 cm

### Poids

49 cm : 13,5 kg  
55 cm : 14 kg

### Poids maximal de l'utilisateur

130 kg

### Matériaux

Housse Comfort : polyéthylène  
Siège souple Comfort : polyuréthane  
Châssis : tube en acier revêtu de peinture en poudre  
Assise/dossier : polypropylène  
Accoudoirs : polypropylène  
Repose-pieds : polypropylène  
Supports des roulettes : polyamide  
Roulettes verrouillables à roulement à billes : polyamide/TPE

### Entretien

Nettoyer le produit avec un agent nettoyant sans solvant (pH 5-9) ou une solution désinfectante à 70 %. Décontamination possible à 85 °C maximum si nécessaire.





### **Autopropulsée**

Facile à manipuler pour les utilisateurs autonomes.

### **Transfert simple et sécurisé**

Les transferts latéraux peuvent être effectués avec plus de facilité grâce au siège plat et à la position des freins.



# Etac Clean 24"

Cette variante d'Etac Clean convient aux personnes qui peuvent diriger la chaise seules et souhaitent maximiser leur mobilité.

## Facile à manœuvrer pour les utilisateurs autonomes


Les roues de la chaise Etac Clean 24" sont positionnées pour simplifier les manœuvres, sans pour autant que la sécurité ni le confort en soient diminués. En raison du grand espace dégagé sur le siège devant les roues, les transferts vers et depuis la chaise deviennent moins complexes. De plus, les manettes de freinage, positionnées sous le siège, ne gênent pas le transfert tout en demeurant accessibles.

Etac Clean 24" apporte les mêmes avantages que les autres produits de la gamme Clean, mais peut de surcroît être maniée par un utilisateur sans aide.



## Accessoires

Découvrez notre vaste gamme d'accessoires en consultant la section « Accessoires pour tous les modèles Clean », page 26-27.

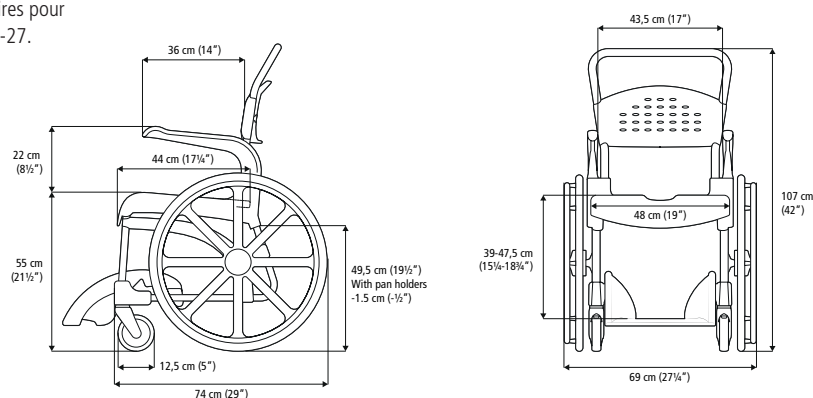

### Etac Clean 24"

55 cm avec roues arrière de 24 pouces, blanche  
55 cm avec roues arrière de 24 pouces, vert lagon

80229276  
80229216

### Poids

20 kg

### Poids maximal de l'utilisateur

130 kg

### Matériaux

Adaptateur de roue arrière : aluminium  
Roues arrière : polyamide,  
pneus increvables

Châssis : tube en acier revêtu de peinture en poudre  
Assise/dossier : polypropylène  
Accoudoirs : polypropylène  
Repose-pieds : polypropylène  
Supports des roulettes : polyamide  
Roulettes à roulement à billes : polyamide/TPE

### Entretien

Nettoyer le produit avec un agent nettoyant sans solvant (pH 5-9) ou une solution désinfectante à 70 %. Décontamination possible à 85 °C maximum si nécessaire.



## Accessoires



### Dossier souple

80209225  
Réglable.  
Lavable à 60 °C max.



### Coussin souple d'assise

Gris : 80209260  
Réfléchissant la chaleur et à surface antidérapante. Largeur de la découpe anatomique : 17 cm.  
Matériau : polyéthylène.  
Lavage à 60 °C max. ou avec une lingette imprégnée d'alcool.



### Soutien latéral

80209509  
À largeur réglable. Matériau : tissu en polyester, velcro et polyéthylène  
Lavable à 60 °C max.  
*Non compatible avec le produit suivant : 80209225.*



### Coussin souple de dossier

Gris : 80209261  
Réfléchissant la chaleur et à surface antidérapante. Matériau : polyéthylène. Lavage à 60 °C max. ou avec une lingette imprégnée d'alcool.



### Barre de maintien

80209246  
À fixer sur l'accoudoir.  
Matériaux : aluminium, polyéthylène cellulaire, polypropylène.  
*Non compatible avec les produits suivants : 80209228, 80209237 et 80209226.*



### Coussin d'assise plein Comfort

80209247  
Lorsqu'un siège sans trou est nécessaire. Matériau : polyuréthane. Lavage à 85 °C max. ou avec une lingette imprégnée d'alcool.



### Sangle pectorale

80209442  
Réglable en longueur. À fixer sur le dossier. Matériau : polyester.



### Kit Comfort

80209237  
Inclut le coussin d'assise percée Comfort (ref : 80209227) et le coussin dossier et accoudoirs (80209228). Lavage à 60 °C max. ou avec une lingette imprégnée d'alcool.  
*Non compatible avec les produits suivants : 80209225 et 80209246.*



### Ceinture de positionnement

80209440  
Réglable en longueur.  
Fixation par sangles velcro.  
Matériau : polyester.



### Coussin dossier et accoudoirs

80209228  
Dossier souple avec coussins d'accoudoir intégrés. Matériau : polyéthylène. Lavage à 60 °C max. ou avec une lingette imprégnée d'alcool.  
*Non compatible avec les produits suivants : 80209225 et 80209246.*



### Ceinture de sécurité

80209034  
À fixer sur l'arrière du dossier. Se combine systématiquement avec la ceinture de positionnement.  
Matériau : polyester.  
*Non compatible avec le dossier souple : 80209225.*



### Coussins pour accoudoirs Lot de deux

80209226  
Souples et chauds, ils libèrent les poignées pour garantir une prise ferme lorsque vous vous relevez. Matériau : polyéthylène. Lavage à 60 °C max. ou avec une lingette imprégnée d'alcool.  
*Non compatible avec la barre de maintien : 80209246.*



### Coussin anti-escarres

80209245  
Coussin pneumatique ROHO avec d'excellentes propriétés de répartition de la pression. Pression de l'air réglable. Largeur de la découpe anatomique : 21 cm. Matériau : néoprène. Température de lavage max. : 60 °C.



### Coussin d'assise percé Comfort

Avec ouverture largeur 15 cm : 80209301  
Avec ouverture largeur 18 cm : 80209227  
Siège avec contour souple. Matériau : polyuréthane. Lavage à 85 °C max. ou avec une lingette imprégnée d'alcool.

## Accessoires



**Porte-savon  
(incompatible avec Clean 24")**  
Gris : 80209266  
Se fixe sur le côté du siège. Support intégré pour le pommeau de douche.  
Matériau : polypropylène.  
(Incompatible avec Clean 60 cm.)



**Support pour seau**  
Gris : 80209258  
Compatible avec le seau avec poignée et couvercle fourni, ainsi qu'avec les autres seaux à rebord épais. Matériau : polypropylène.



**Bassin**  
Gris : 80209254  
Matériau : polypropylène.  
**Bassin et couvercle avec poignée**  
Gris : 80209255  
Matériau : polypropylène.



**Attaches pour fixation basse du bassin/seau**  
Grise : 80209259  
4 attaches à fixer sur le support bassin/seau pour l'abaisser de 6 cm.  
Matériau : polypropylène.



**Support bassin**  
Gris : 80209257  
Compatible à la fois avec le bassin fourni, le bassin hygiénique et les bassins à usage hospitalier standard à rebord fin.



**Bassins jetables**  
80209282  
Rigides et solides. 50 pièces.



**Seau avec poignée et couvercle**  
80302026  
Support seau non inclus.  
Matériau : polypropylène.



**Kit de support pour bassin jetable**  
Gris : 80209229  
Compatible avec le bassin jetable.

## Accessoires supplémentaires – Clean à hauteur réglable uniquement



**Repose-pieds rabattables, la paire**  
80209250  
Amovibles, à hauteur réglable. Fixations incluses.  
Matériaux : aluminium revêtu de poudre et polypropylène.



**Appui-mollet réglable**  
Droit : 80209252  
Gauche : 80209253  
Fixations incluses.  
Matériaux : plastique ABS, acier inoxydable.


## Accessoires supplémentaires – Clean 49 et 55 cm uniquement



**Adaptateur de roue arrière**  
Blanc : 80209262  
Uniquement compatible avec chaise Clean 55 cm. Matériaux : aluminium et polyamide.



**Kit de surélévation avec roues**  
Blanc, 4 pièces : 80209511  
Vert lagon, 4 pièces : 80209512  
Surélève le siège de 5 cm.  
Matériaux : polyamide, TPE, aluminium.

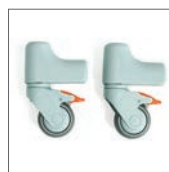

**Roulettes de 75 mm**  
Blanches, pour l'avant, lot de deux : 80209515. Blanches, pour l'arrière, lot de deux : 80209516. Vert lagon, pour l'avant, lot de deux : 80209513. Vert lagon, pour l'arrière, lot de deux : 80209514. Abaissent le siège de 5 cm. De série sur la Clean 44 cm.  
Matériaux : polyamide, TPE, aluminium.

# Chaise de douche et de toilettes Etac Swift Mobile

Chaise de douche et de toilettes disponible en plusieurs modèles, appréciée pour sa polyvalence.



*L'assise est amovible pour simplifier le nettoyage.*

## Différents modèles

Etac Swift Mobile se décline en trois versions : Swift Mobile classique, Swift Mobile 160 (supporte un poids maximal de 160 kg) et Swift Mobile, avec roues arrière de 24 pouces.

Les trois modèles présentent le même design et les mêmes caractéristiques.

## Dossier offrant un maximum de confort

Le dossier souple peut être ajusté à l'aide de sangles velcro. Il est fabriqué dans un matériau qui ne colle pas au corps, sèche rapidement et s'enlève facilement pour être nettoyé. Pour ne pas glisser, il est fixé sur la barre de poussée (fixation 3 points).

## Choix de la hauteur d'assise

La hauteur d'assise se règle aisément, sans outil, entre 45 et 60 cm, à la hauteur de passage au dessus des toilettes. Elle s'adapte aux transferts vers et depuis la chaise et aux conditions de travail du soignant.

### Description

Swift Mobile, à assembler sans outil	80209400
Swift Mobile, montée	80209401
Swift Mobile, à assembler sans outil, avec support seau	80209404
Swift Mobile, à assembler sans outil, avec support bassin	80209405
Swift Mobile, montée avec support bassin	80209406
Standard : dossier, assise, accoudoirs, repose-pieds et 4 roulettes verrouillables	

### Matériaux

Châssis : acier laqué époxy  
Assise/accoudoirs : polypropylène  
Dossier : polyester/velcro  
Repose-pieds : polypropylène  
Roulettes : polyamide/TPE, verrouillables, à roulement à billes.

### Dimensions

Largeur totale : 58 cm  
Distance entre les accoudoirs : 48 cm

### Poids

16,5 kg



Nettoyer le produit avec un agent nettoyant sans solvant (pH 5-9) ou une solution désinfectante à 70 %. Décontamination possible à 85 °C maximum si nécessaire.

## Caractéristiques



### Dossier réglable

Le dossier s'ajuste à l'aide de sangles velcro.



### Repose-pieds ergonomiques

Le repose-pieds légèrement incurvé assure confort et stabilité. Les talons sont protégés des roulettes. Rabattable pour faciliter les transferts.



### Réglage facile de la hauteur

Swift Mobile peut être montée à différentes hauteurs de siège fixes. Le réglage s'effectue des deux côtés, sans outil.




### Accoudoirs rabattables

Les accoudoirs peuvent être rabattus pour faciliter les transferts latéraux. S'il y a lieu, ils peuvent être placés en position rabattue de façon permanente au moyen d'un dispositif de verrouillage (accessoire).

## Accessoires

Découvrez notre vaste gamme d'accessoires, « Accessoires pour tous les modèles Swift Mobile », page 36

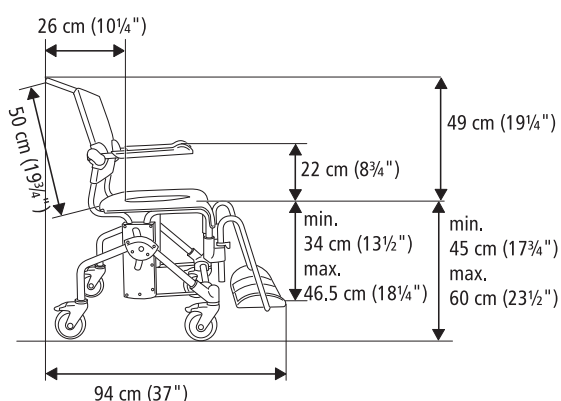

# Etac Swift Mobile XL 160

Cette chaise supporte un poids maximal de 160 kg et est équipée d'accoudoirs plus espacés.



## Davantage d'espace


Sur la chaise Swift Mobile 160, les accoudoirs sont espacés de 6 cm supplémentaires (3 cm de chaque côté).

## Poids supporté plus important

Etac Swift Mobile XL 160 a tous les avantages de la chaise Swift Mobile classique, à savoir des accoudoirs rabattables, un dossier ajustable, un repose-pieds ergonomique et une hauteur réglable. De plus, elle est suffisamment robuste pour supporter des patients pesant jusqu'à 160 kg.

## Simple à personnaliser

Tous les accessoires de la chaise Swift Mobile classique conviennent à la Swift Mobile XL 160.

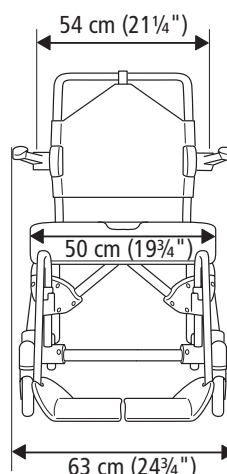

### Description

Swift Mobile 160	80209420
Swift Mobile 160 avec support seau	80209421
Swift Mobile 160 avec support bassin	80209422
Standard : dossier, assise, accoudoirs, repose-pieds et 4 roulettes verrouillables	

### Matériaux

Châssis : acier laqué époxy  
Assise/accoudoirs : polypropylène  
Dossier : polyester/velcro  
Repose-pieds : polypropylène  
Roulettes : polyamide/TPE, verrouillables, à roulement à billes

### Dimensions

Pour les autres dimensions, se reporter à la section « Chaise de douche et de toilettes Etac Swift Mobile », page 28.

### Poids

17,3 kg



Nettoyer le produit avec un agent nettoyant sans solvant (pH 5-9) ou une solution désinfectante à 70 %. Décontamination possible à 85 °C maximum si nécessaire.

# Etac Swift Mobile 24"


Une solution parfaite pour les utilisateurs autonomes.

## Transferts latéraux favorisés

La chaise Etac Swift Mobile 24" est facile à utiliser et à déplacer. Bien positionnées, les roues arrière sont très accessibles et garantissent une bonne maniabilité.

L'espace disponible à l'avant du siège est suffisant pour que les transferts latéraux soient réalisés en toute sécurité. La chaise Swift Mobile 24" peut par ailleurs être réglée en hauteur, comme tous les autres modèles Swift Mobile.

Une chaise Swift Mobile à quatre roulettes classique peut être convertie en Swift Mobile 24" en assemblant le kit de roues arrière livré comme accessoire. Se reporter à la page 35.

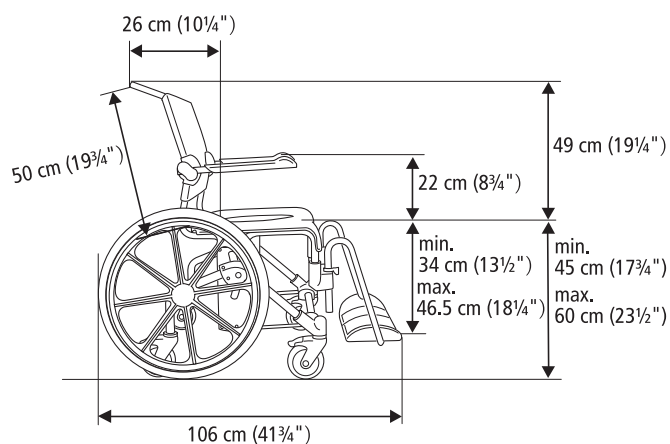

## Accessoires

Découvrez notre vaste gamme d'accessoires, « Accessoires pour tous les modèles Swift Mobile », page 36

### Description

Swift Mobile 24" montée	80209402
Swift Mobile 24" montée, avec support bassin	80209408
Swift Mobile 24" avec support seau	80209407

Standard : dossier, assise, accoudoirs, repose-pieds, 4 roulettes verrouillables, roues arrière de 24 pouces et freins.

### Dimensions

Largeur totale : 74 cm  
Distance entre les accoudoirs : 48 cm

### Matériaux

Roues arrière : pneus solides, polyamide, roulement à billes  
Freins : polyamide, acier inoxydable  
Pour les autres matériaux, consulter la page 28

### Poids

24,4 kg



Nettoyer le produit avec un agent nettoyant sans solvant (pH 5-9) ou une solution désinfectante à 70 %. Décontamination possible à 85 °C maximum si nécessaire.

# Chaise Etac Swift Mobile Tilt inclinable

Dotée d'une fonction d'inclinaison vers l'arrière.

La chaise Etac Swift Mobile Tilt est disponible en deux modèles avec inclinaison par vérins pneumatiques et inclinaison par vérins électriques. Ces deux modèles présentent les mêmes caractéristiques que la chaise Etac Swift Mobile (se reporter à la page 28). Le modèle Swift Mobile Tilt existe aussi en version bariatrique 160 kg (voir page 34).

## Inclinaison depuis le côté

La fonction inclinaison s'active depuis le côté de la chaise Etac Swift Mobile. Le soignant, tout en bénéficiant de conditions de travail ergonomiques peut ainsi garder le contact visuel et la communication avec le patient.

## Redressement assisté en position verticale

Les pistons à gaz pneumatiques permettent de ramener le siège en position verticale. Lors du basculement, le corps du patient fait office de contrepoids et le mouvement s'effectue donc en douceur. Le risque de blessure pour le personnel soignant est très réduit. La hauteur d'assise se règle manuellement, sans outil, de 50 à 65 cm sur 7 positions, espacées chacune, de 2,5 cm.



*Une chaise en position inclinée est plus stable et simplifie la dispense de soins.*



## Fonction d'inclinaison électrique pour des manœuvres pratiques et en douceur

La chaise de douche et de toilettes Etac Swift Mobile Tilt existe également en version inclinaison électrique. La fonction inclinaison se règle à l'aide d'une télécommande. Ainsi, l'utilisateur peut ainsi garder le contrôle sur le basculement. Dans la mesure où le moteur est peu encombrant, le positionnement de la chaise de douche sur les toilettes demeure possible. L'utilisation de la chaise dans la douche est autorisée et un chargeur de batterie distinct est inclus.




## Caractéristiques



### Barre d'inclinaison unique

La barre qui actionne l'inclinaison est facile d'accès d'un côté comme de l'autre.

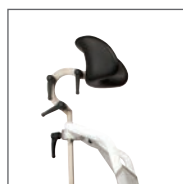

### Repose-tête articulé

Réglable, le repose-tête délivre un soutien confortable et relaxant. Livré en standard.





### Contact visuel tout au long de l'inclinaison

La fonction exclusive de basculement garantit une position de travail ergonomique au soignant, qui peut maintenir le contact visuel avec le patient.



### Inclinaison électrique

Améliore les conditions de travail du personnel soignant. Grande maniabilité grâce à la télécommande.

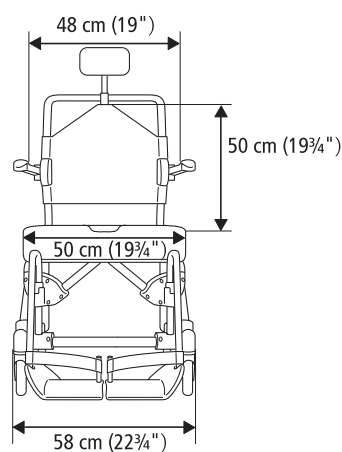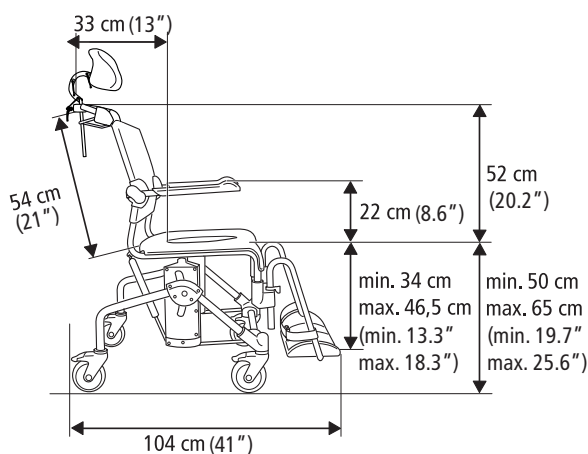

## Accessoires

Découvrez notre vaste gamme d'accessoires, « Accessoires pour tous les modèles Swift Mobile », page 36

### Description de la chaise Etac Swift Mobile

#### Tilt

Swift Mobile Tilt	80209410
Swift Mobile Tilt avec support seau	80209411
Swift Mobile Tilt avec support bassin	80209412
Swift Mobile Tilt électrique	80209490
Swift Mobile Tilt électrique avec support seau	80209491
Swift Mobile Tilt électrique et support bassin	80209492

Standard : repose-tête, dossier, accoudoirs, assise, repose-pieds, sangles pour chevilles et 4 roulettes verrouillables.

#### Dimensions

Inclinaison réglable : la plage d'angles 0° - -35° peut être remplacée par 5° - -30°.

### Matériaux

Pistons : capacité de levage 130 N  
Pour les autres matériaux, consulter la « Chaise de douche et de toilettes Etac Swift Mobile », page 28

### Poids

19,7 kg  
Avec moteur : 23,6 kg



Nettoyer le produit avec un agent nettoyant sans solvant (pH 5-9) ou une solution désinfectante à 70 %. Décontamination possible à 85 °C maximum si nécessaire.

# Etac Swift Mobile Tilt XL 160

Swift Mobile Tilt XL 160 possède tous les avantages de la chaise Swift Mobile Tilt classique et, de surcroît, accepte un poids allant jusqu'à 160 kg.

## Inclinaison depuis le côté

La chaise Swift Mobile Tilt peut être basculée depuis le côté. Ainsi, le soignant travaille dans une position ergonomique. Le placement sur le côté permet en outre de maintenir le contact visuel et la communication avec le patient pendant l'inclinaison.

## Redressement assisté en position verticale

Les pistons pneumatiques aident à basculer le siège en position verticale. Lors du basculement, le corps du patient fait office de contrepoids et le mouvement s'effectue donc en douceur. Le risque de blessure pour le personnel soignant est réduit. La hauteur d'assise se règle manuellement, sans outil, de 50 à 65 cm sur 7 positions, espacées chacune, de 2,5 cm.




## Accessoires

Découvrez notre vaste gamme d'accessoires, « Accessoires pour tous les modèles Swift Mobile », page 36



### Davantage d'espace

Sur la chaise Swift Mobile 160, les accoudoirs sont espacés de 6 cm supplémentaires. 3 cm de chaque côté.

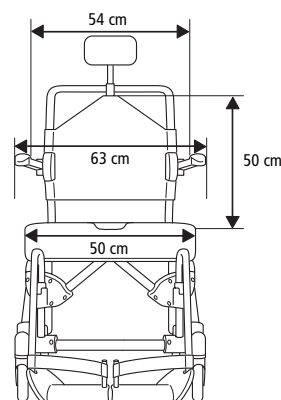

### Description

Swift Mobile Tilt 160	80209480
Swift Mobile Tilt 160 avec support seau	80209481
Swift Mobile Tilt 160 avec support bassin	80209482

Standard : repose-tête, dossier, accoudoirs, assise, repose-pieds, sangles pour chevilles et 4 roulettes verrouillables.

### Dimensions

Largeur totale : 63 cm  
Longueur totale : 104 cm  
Inclinaison réglable : la plage d'angles 0° - -35° peut être remplacée par 5° - -30°.  
Hauteur du siège réglable : 50-65 cm  
Distance entre les accoudoirs : 54 cm

### Matériaux

Pistons : capacité de levage 130 N  
Pour les autres matériaux, consulter la page 28

### Poids


20,4 kg



Nettoyer le produit avec un agent nettoyant sans solvant (pH 5-9) ou une solution désinfectante à 70 %. Décontamination possible à 85 °C maximum si nécessaire.



## Accessoires pour tous les modèles Swift Mobile

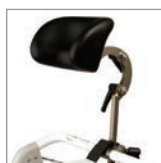

### Repose-tête articulé 80209447

Complet avec fixations. Réglable à la fois en hauteur, en profondeur et latéralement. De série sur les modèles inclinables. Matériaux : polyuréthane, acier inoxydable et zinc. Lavage à 85 °C max. ou avec une lingette imprégnée d'alcool.



### Coussin dossier et accoudoirs 80209455

Dossier souple avec coussins d'accoudoirs intégrés. Matériau : polyéthylène. Lavage à 60 °C max. ou avec une lingette imprégnée d'alcool.



### Kit d'élargissement des accoudoirs

La paire : 80209441  
Pour augmenter l'espace entre les accoudoirs de 6 cm. De série sur les chaises Swift Mobile/Tilt 160.



### Kit Comfort

80209457  
Inclut le coussin d'assise percée confort (ref : 80209227) et le coussin dossier et accoudoirs (80209228). Lavage à 60 °C max. ou avec une lingette imprégnée d'alcool.



### Accoudoirs pour hémiplegique

La paire : 80209035  
Compatible avec les côtés gauche et droit. Matériau : polyéthylène cellulaire, aluminium, acier inoxydable, polystyrène.



### Coussins pour accoudoirs – lot de deux

80209508  
Ces manchettes procurent un appui doux pour les bras. Matériau : polyéthylène. Lavage à 60 °C max. ou avec une lingette imprégnée d'alcool.



### Kit blocage accoudoirs

La paire : 80209445  
Bloque l'accoudoir en position horizontale. Matériau : acier inoxydable.




### Soutien latéral

80209509  
À largeur réglable. Matériaux : polyester, velcro, polyéthylène. Lavage à 60 °C max.



### Coussin de dossier souple

80209448  
Chaud, doux et hydrofuge. Matériau : polyéthylène. Lavage à 60 °C max. ou avec une lingette imprégnée d'alcool.

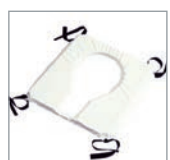

### Coussin souple avec ouverture standard

80209065  
Matériau : polyéther/housse revêtue étanche



### Coussin d'assise plein Comfort

80209434  
Lorsqu'un siège sans trou est nécessaire. Matériau : mousse de polyuréthane. Lavage à 85 °C max. ou avec une lingette imprégnée d'alcool.



### Coussin souple avec ouverture ovale

80209067  
Matériau : polyéther/housse revêtue étanche



### Coussin d'assise percé Comfort

Avec ouverture largeur 15 cm : 80209507  
Avec ouverture largeur 18 cm : 80209506  
Matériau : polyuréthane  
Lavage à 85 °C max. ou avec une lingette imprégnée d'alcool.



### Sangle pectorale

80209442  
Réglable en longueur. À fixer sur le dossier. Se combine systématiquement avec la ceinture de positionnement. Matériau : polyester.



### Coussin anti-escarres

80209245  
Coussin pneumatique ROHO avec d'excellentes propriétés de répartition de la pression. Pression de l'air réglable. Largeur de la découpe anatomique : 21 cm. Matériau : néoprène. Température de lavage max. : 60 °C.



### Barre de maintien


Longueur : 60,5 cm : 80303034  
Longueur : 66,5 cm : 80209452  
Pour une sécurité et un soutien supplémentaires. Matériaux : aluminium, polypropylène et polyéthylène cellulaire. Remarque : la barre de 66,5 cm convient aux Swift Mobile 160 et Swift Mobile Tilt 160.

**Ceinture de positionnement**

80209440  
Réglable en longueur.  
Fixation par sangles velcro.  
Matériau : polyester

**Repose-pieds pour un soutien des jambes et des mollets**

80209443  
Compatible avec les côtés gauche et droit.  
6 hauteurs au choix.  
Matériau : acier inoxydable, polypropylène.

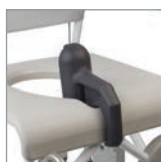**Pare-éclaboussures**

80209430  
Se fixe dans l'ouverture de la découpe anatomique. S'installe une fois que l'utilisateur a pris place dans le fauteuil.  
Matériau : polyuréthane

**Support de jambes**

1 unité : 80209446  
Support de jambes avec repose-pieds pliable et angle d'inclinaison réglable. Sangle pour chevilles non fournie.

**Attache pour support bassin/seau**

Kit de 4 pièces : 80209435  
À monter sous le siège.  
Matériau : polyamide.

**Cale-talonnères**

La paire : 80209432  
Réglables en longueur.  
Matériau : polyester

**Support bassin**

80209257  
Compatible à la fois avec le bassin fourni et les bassins à usage hospitalier standard à rebord fin. Une fixation est indispensable.  
Matériau : polyamide.

**Dispositifs antibascule - lot de deux**

Sans la fixation pour Swift Mobile 24" : 80209438  
Avec la fixation (pour Swift Mobile) : 80209439 (pour Swift Mobile Tilt) : 80209459  
Améliore la sécurité si le centre de gravité est loin derrière, par exemple, dans le cas des utilisateurs amputés d'un membre inférieur.  
Matériau : aluminium

**Bassin**

80209254

**Bassin avec couvercle et poignée**

80209255  
Matériau : polypropylène.

**Aide au franchissement**

80209449  
Pour un franchissement facile des seuils et d'autres obstacles

**Support seau**

80209258  
Compatible avec les seaux à rebord épais. Une fixation est indispensable.  
Matériau : polypropylène.

**Kit de grandes roues arrières**

80209436  
Roues arrière de 24 pouces avec pneus increvables. Avec fixation intégrée pour dispositif antibascule.  
Matériaux : polyamide, acier inoxydable.  
Fixations et freins inclus. Non compatible avec Swift Mobile 160 et Swift Mobile Tilt.

**Seau avec poignée et couvercle**

80302026  
Matériau : polypropylène

**Attaches pour fixation basse du bassin/seau**

80209259  
À fixer sur le support pour bassin/seau.  
Matériau : polypropylène.

**Moteur d'inclinaison**

80209499  
Pour Swift Mobile Tilt uniquement.  
Télécommande et chargeur inclus.

**Support jambes pour personne amputée**

80209510  
À hauteur, longueur et inclinaison réglables.  
Compatible avec les côtés gauche et droit.

**Repose-jambe avec élévateur et repose-mollet**

80209437  
Compatible avec les côtés gauche et droit.  
Matériau : ABS.

# Chaise de douche Etac Tripp Tilt inclinable

La taille parfaite pour les enfants, adolescents ou personnes de petites tailles.



*Les accoudoirs sont rabattables et verrouillables en position basse.*

## Une chaise adaptée avec de nombreuses fonctionnalités

Etac Tripp est une chaise de douche et de toilettes inclinable manuellement grâce à un levier situé sur le côté gauche. Ses dimensions sont parfaitement adaptées aux enfants, adolescents ou aux personnes de petites tailles.

Positionné latéralement, le soignant travaille ergonomiquement et garde un contact visuel avec l'enfant lors de l'inclinaison.

Le dossier et l'assise se détachent facilement.

## Différents accessoires

La chaise Tripp peut être équipée d'un repose-tête, d'une ceinture de positionnement, d'un bassin et de différents types de coussins souples, selon les besoins. Le support bassin et le pare-éclaboussure sont inclus en standard.

### Description

Tripp Tilt 80209005  
Standard : dossier, assise, accoudoirs, repose-pieds relevables, support bassin et pare-éclaboussures

### Dimensions

Largeur totale : 54,5 cm  
Distance entre les accoudoirs : 36 cm  
Largeur du siège : 38 cm

### Poids


17 kg  
Inclinaison réglable : 0° à -35°

### Matériaux

Châssis : tube en acier revêtu de peinture en poudre  
Assise/dossier : plastique ABS  
Accoudoirs : polyuréthane  
Repose-pieds : polypropylène  
Tube des accoudoirs et support du repose-pieds : acier inoxydable  
2 roulettes à roulements à billes verrouillables : acier galvanisé/caoutchouc



Nettoyer le produit avec un agent nettoyant sans solvant (pH 5-9) ou une solution désinfectante à 70 %. Décontamination possible à 85 °C maximum si nécessaire.

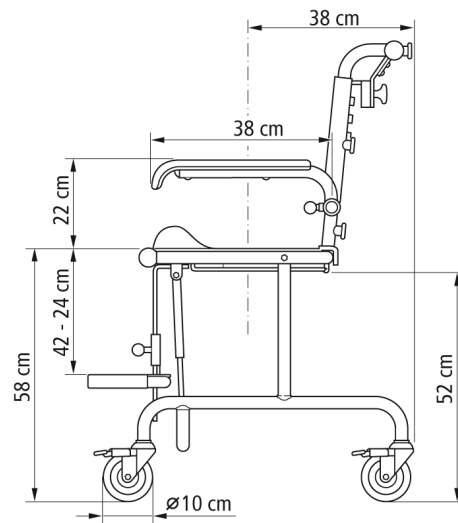


## Accessoires



**Repose-tête**  
80209041  
À hauteur réglable.  
Matériau : polyuréthane



**Ceinture de positionnement**  
80209034  
Se fixe à l'horizontale ou en diagonale.  
Réglable en longueur.  
Matériau : polyester

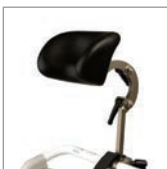

**Repose-tête à profondeur réglable**  
84005084  
À hauteur, profondeur et inclinaison réglables. Matériaux : polyuréthane, acier inoxydable et zinc.  
Lavage à 85 °C max. ou avec une lingette imprégnée d'alcool.



**Coussin souple**  
80209047  
Réfléchissant la chaleur et antiglisse.  
Matériau : polyéthylène cellulaire



**Bassin**  
80209031  
Conçu pour s'adapter parfaitement au siège.  
Matériau : ABS.



**Coussin d'assise souple**  
80209066  
Matériaux : polyéther, tissu enduit



**Attache de fixation du bassin**  
80209049  
Maintient le bassin en place lors de l'inclinaison de la chaise de douche.



**Coussin de dossier souple**  
80209046  
Réfléchissant la chaleur.  
Se fixe sur un dossier standard.  
Matériau : polyéthylène.



**Barre de maintien de 50 cm**  
80303035  
Pour une sécurité et un soutien supplémentaire.  
Matériaux : profilé en aluminium revêtu de peinture en poudre/polyéthylène cellulaire.



**Coussin pour le dos**  
80209042  
Diminue la profondeur d'assise de 6 cm.  
Matériaux : polyéther, tissu enduit.



Pour plus d'informations  
sur notre garantie de 5 ans,  
consultez également  
le site [www.etac.com](http://www.etac.com).





# Toilettes

Pour les personnes à mobilité réduite, s'asseoir et se relever peuvent être des tâches douloureuses et difficiles. Nous proposons une large gamme de produits pour les toilettes qui améliorent le confort et la sécurité.

# Fauteuil garde-robe Etac Swift Commode

Ce produit trois-en-un peut être utilisé comme fauteuil garde-robe, chaise de douche et surélévateur de toilettes.

## Confortable et fonctionnel

Le fauteuil garde-robe Etac Swift est confortable et reste discret dans la chambre. Le coussin d'assise dissimule un bassin amovible muni d'un couvercle sécuritaire qui se verrouille automatiquement lorsqu'il est soulevé. Le fauteuil garde-robe Swift peut être légèrement incliné vers l'avant pour que l'utilisateur puisse se mettre debout sans effort.

## 3-en-1

Le fauteuil garde-robe Swift peut également servir de chaise de douche ou de surélévateur de toilettes sur pied. Les embouts souples garantissent une excellente prise sur toutes les surfaces.

## Nettoyage facile

Le fauteuil garde-robe Swift a été conçu pour être facilement nettoyé. Il présente des surfaces lisses, les coussins sont facilement amovibles et résistent à la corrosion. Il est livré démonté. L'assemblage et le réglage de la hauteur sont faciles et ne nécessitent aucun outil.



Grâce aux coussins, le fauteuil garde-robe Swift est discret et s'avère très agréable pour l'habillage et le déshabillage.

### Description

Fauteuil garde-robe Swift Commode avec coussins 81702030  
Fauteuil garde robe Swift Commode sans coussins 81702060

### Dimensions

Largeur totale : 56 cm  
Largeur du siège : 54 cm  
Hauteur du siège : 42-57 cm  
Distance entre les accoudoirs : 45 cm

### Matériaux

Siège, dossier et accoudoirs : polypropylène  
Pieds : aluminium et polyamide  
Embouts : TPE  
Coussins de dossier et d'assise : polyéthylène et nylon

### Poids

5,4 kg



Nettoyer le produit avec un agent nettoyant sans solvant (pH 5-9) ou une solution désinfectante à 70 %. Décontamination possible à 85 °C maximum si nécessaire.



### Couvercle à verrouillage automatique inclus

Le bassin équipé d'un couvercle verrouillable s'intègre parfaitement dans le siège.

## Accessoire



### Porte-savon/support pour couvercle

80209266

Pratique aussi pour le papier toilettes

Matériau : polypropylène

# Surélévateur de toilettes sur pieds Etac Swift

Léger et facile à manier.

## Stabilité remarquable

Le surélévateur de toilettes sur pied Etac Swift procure un appui stable. Sa surface large et ses embouts souples spéciaux permettent une excellente adhérence au sol.

## Fonctionnalité

Le siège est réglable en hauteur et peut être légèrement incliné vers l'avant. Le patient peut ainsi se mettre debout avec moins de difficultés et la pression sur les articulations de ses hanches est réduite. Les pieds du surélévateur s'enlèvent sans problème pour le transport en voiture.

## Flexibilité

Le surélévateur de toilettes sur pied Swift peut servir aussi de tabouret de douche. Léger, il se déplace sans peine. Il peut également être transformé en fauteuil garde-robe Etac Swift Commode en l'équipant des accessoires ci-dessous.



## Accessoires



**Dossier**  
84005069  
Matériau : polypropylène



**Porte-savon/support pour couvercle**  
80209266  
Matériau : polypropylène



**Coussin d'assise souple**  
84005064  
Matériau : polyéthylène



**Dossier souple**  
84005065  
Matériau : polyéthylène



**Bassin**  
Sans couvercle 84005066  
Avec couvercle 84005068  
Matériau : polypropylène

Le surélévateur sur pied Etac Swift incorpore un pare-éclaboussures qui facilite le nettoyage, tout comme ses surfaces lisses.

### Description

Surélévateur de toilettes sur pieds Swift 81702020

### Dimensions

Largeur totale : 56 cm  
Largeur du siège : 54 cm  
Hauteur du siège : 42-57 cm  
Distance entre les accoudoirs : 45 cm

### Matériaux

Siège et accoudoirs : polypropylène  
Pieds : aluminium et polyamide  
Embouts : TPE

### Poids

3,9 kg



Nettoyer le produit avec un agent nettoyant sans solvant (pH 5-9) ou une solution désinfectante à 70 %. Décontamination possible à 85 °C maximum si nécessaire.

# Siège de toilette sur pied Etac Kaskad

Surélévateur de toilettes sur pied à la fois classique et fonctionnel.

## Empilable et réglable

Etac Kaskad possède une armature fixe, empilable et réglable en hauteur. Les accoudoirs offrent une bonne stabilité au moment de s'asseoir ou de se relever. Le couvercle amovible est proposé en standard.



Les sièges Kaskad s'empilent aisément.



La position inclinée des pieds avant garantit une bonne stabilité.

## Accessoires



**Seau avec poignée et couvercle**  
80302026  
Support seau non inclus.  
Matériau : polypropylène



**Support seau**  
80302025  
Pour le seau avec poignée.  
Matériau : acier époxy



**Seau en plastique**  
80302023  
S'utilise sans le support seau.  
Matériau : polypropylène

### Description

Kaskad 80302012

### Dimensions

Profondeur totale : 47 cm  
Largeur totale : 56,5 cm  
Distance entre les accoudoirs : 55,5 cm  
Hauteur : 81 cm  
Hauteur du siège : 45 – 57 cm

### Matériaux

Armature : tube en acier époxy  
Siège de toilettes : polypropylène

### Poids

Avec pare-éclaboussures : 5,2 kg



Nettoyer le produit avec un agent nettoyant sans solvant (pH 5-9) ou une solution désinfectante à 70 %. Décontamination possible à 85 °C maximum si nécessaire.

# Surélévateur de toilettes Etac Cloo

Cloo est un réhausseur de toilettes à hauteur réglable qui allie flexibilité et simplicité. Sa ligne discrète et sa courbe lui permet de se fondre dans le décor de la salle de bain.

## Inclinaison et hauteur réglable

Cloo peut être réglé à trois hauteurs différentes. De plus, il peut être légèrement incliné vers l'avant afin d'aider l'utilisateur à s'asseoir et à se relever.

## Accoudoirs fonctionnels

Cloo est disponible avec ou sans accoudoirs. Les accoudoirs se rabattent de manière temporaire ou permanente si nécessaire. Ils sont amovibles. Il est possible de n'utiliser qu'un seul accoudoir si l'espace autour des toilettes est trop restreint.



### Ajustement facile de la hauteur

Pour modifier la hauteur, il suffit d'ajouter ou de retirer des cales de surélévation, et ce, sans recourir à aucun outil.



### Passage sans effort à la position debout

Le surélévateur de toilettes Cloo peut être légèrement incliné vers l'avant si l'utilisateur éprouve des difficultés à se lever.



### Siège amovible

Le siège Cloo est conçu avec des surfaces lisses qui facilitent le nettoyage. Il peut aussi être retiré sans aucun outil.

## Accessoires



### Accoudoirs

Lot de deux : 80301222.  
Des accoudoirs peuvent être installés sur le modèle Cloo sans accoudoirs. Le montage s'effectue sans outil.  
Matériau : polyamide



### Cales de surélévation

Kit de 4 pièces : 80301221  
Pour obtenir une hauteur de siège égale à 14 cm, un jeu de cales supplémentaires est requis.

### Description

Cloo 80301204  
Cloo avec accoudoirs 80301214

### Dimensions

Largeur du siège : 40 cm  
Hauteur du siège : 6–10 cm  
Hauteur de l'accoudoir depuis la surface supérieure du siège : 21 cm  
Largeur totale sans les accoudoirs : 40 cm  
Largeur totale, accoudoirs inclus : 60 cm  
Distance entre les accoudoirs : 49 cm

### Poids

Avec accoudoirs : 4,8 kg  
Sans accoudoirs : 3,3 kg

### Matériaux

Siège : polypropylène  
Fixations : aluminium  
Cales de surélévation : polyamide

### Couleurs

Réhausseur : Blanc.  
Accoudoirs : Gris



Nettoyer le produit avec un agent nettoyant sans solvant (pH 5-9) ou une solution désinfectante à 70 %. Décontamination possible à 85 °C maximum si nécessaire.

# Surélévateur amovible Etac Hi-Loo

Surélévateur de toilettes stable et confortable avec clips de fixation.

## Une fonctionnalité et un confort inégalés

Le siège de toilettes surélevé Hi-Loo avec clips est extrêmement stable et simple à enlever. De forme ergonomique, il comporte des découpes anatomiques à l'avant et à l'arrière pour une hygiène intime facilitée. Le siège Hi-Loo est disponible avec ou sans couvercle et en deux hauteurs.



Réhausseur Etac Hi-Loo de 6 cm et 10 cm.

## Caractéristiques



### Fixation en toute sécurité

Les clips de fixation sont revêtus d'un caoutchouc à haute résistance et sont réglables pour s'adapter à la forme de la cuvette des toilettes. Le siège Hi-Loo convient à tous les types courants de toilettes.



### Facile à retirer

Hi-Loo s'installe sans problème sur la cuvette des toilettes et peut être retiré sans avoir à modifier le réglage des clips.



### Avec couvercle

Hi-Loo existe également avec couvercle.

### Description

Hi-Loo amovible, 6 cm	80301065
Hi-Loo amovible, 10 cm	80301105
Hi-Loo amovible avec couvercle, 6 cm	80301067
Hi-Loo amovible avec couvercle, 10 cm	80301101

### Dimensions

Dimensions externes : 39 cm (profondeur) x 36 cm (largeur)  
Ouverture : 27 cm (profondeur) x 20 cm (largeur)

### Matériaux

Siège : polypropylène  
Supports : ABS/PC

### Poids

6 cm : 1,1 kg
10 cm : 1,5 kg
Avec couvercle, 6 cm : 1,9 kg
Avec couvercle, 10 cm : 2,3 kg



Nettoyer le produit avec un agent nettoyant sans solvant (pH 5-9) ou une solution désinfectante à 70 %. Décontamination possible à 85 °C maximum si nécessaire.

# Surélévateur fixe Etac Hi-Loo

Surélévateur fixe de toilettes, stable et confortable.

Le surélévateur fixe de toilettes Etac Hi-Loo est discret, convient à la plupart des toilettes et s'installe solidement sur la cuvette. Le siège ergonomique présente des découpes anatomiques à l'avant et à l'arrière pour une hygiène intime facilitée.

Les accoudoirs se rabattent, mais peuvent aussi être bloqués pour rester dépliés. Il est possible de n'utiliser qu'un seul accoudoir si l'espace est restreint.

Le réhausseur fixe Etac Hi-Loo se décline en deux hauteurs (6 et 10 cm), avec ou sans accoudoirs.



*Le surélévateur fixe Etac Hi-Loo est compatible avec la plupart des toilettes et se nettoie facilement.*

## Caractéristiques



### Retrait facile

Le système de fixation permet de retirer sans difficulté le siège pour le nettoyer.



### Hi-Loo incliné

Recommandé pour les utilisateurs souffrant du genou ou de la hanche.

## Accessoires

Retrouvez les "Accessoires pour le Hi-Loo et le Supporter" à la page 50.

### Description

Hi-Loo fixe, 6 cm	80301106
Hi-Loo fixe, 10 cm	80301107
Hi-Loo fixe avec accoudoirs, 6 cm	80301316-2
Hi-Loo fixe avec accoudoirs, 10 cm	80301317-2
Hi-Loo fixe avec accoudoirs, incliné	80301318-2

### Dimensions

Hauteur de l'accoudoir depuis la surface supérieure du siège : 23 cm  
Distance entre les accoudoirs : 49 cm  
Largeur totale, accoudoirs inclus : 60 cm  
Hauteur du siège Hi-Loo incliné à l'arrière : 10 cm  
Hauteur du siège Hi-Loo incliné à l'avant : 6 cm.

### Matériaux

Siège : polypropylène  
Accoudoirs : polypropylène, tube en acier époxy  
Fixations : aluminium

### Poids

Hi-Loo fixe, avec accoudoirs, 6 cm	: 4,9 kg
Hi-Loo fixe, avec accoudoirs, 10 cm	: 5,8 kg
Hi-Loo fixe, 6 cm	: 2,4 kg
Hi-Loo fixe, 10 cm	: 3 kg
Hi-Loo fixe avec accoudoirs, incliné	: 5,5 kg



Nettoyer le produit avec un agent nettoyant sans solvant (pH 5-9) ou une solution désinfectante à 70 %. Décontamination possible à 85 °C maximum si nécessaire.

# Accoudoirs de toilettes Etac Supporter

Accoudoirs de toilettes stables qui se montent directement sur les toilettes.



## Accoudoirs fonctionnels

Les accoudoirs Etac Supporter se rabattent et sont dotées de poignées arrondies confortables. De par leur conception élégante, ils s'intègrent naturellement à la salle de bain.

## Fixation simple

L'ensemble Supporter se monte sans outil. Il est adapté tant aux toilettes fixées au sol qu'aux suspendues. Si l'espace autour des toilettes est restreint, il est possible de n'utiliser qu'un seul accoudoir.

*L'ensemble Supporter inclut siège et couvercle.*

## Accessoires

Retrouvez les "Accessoires pour le Hi-Loo et le Supporter" à la page 50.

### Description

Supporter 80303112-2

### Dimensions

Largeur totale : 60 cm  
Distance entre les accoudoirs : 49 cm  
Hauteur des accoudoirs au-dessus du siège : 25 cm  
Longueur des accoudoirs : 41,5 cm

### Poids

5 kg

### Matériaux

Armature et accoudoirs : tube en acier époxy  
Housse des accoudoirs : polypropylène  
Couvercle et siège : polypropylène  
Fixations : aluminium



Nettoyer le produit avec un agent nettoyant sans solvant (pH 5-9) ou une solution désinfectante à 70 %. Décontamination possible à 85 °C maximum si nécessaire.



# Accoudoirs de toilettes Etac Supporter Adjustable

Accoudoirs réglables destinés aussi bien aux adultes qu'aux enfants.



## Hauteur et largeur ajustables

Les accoudoirs de toilettes Etac Supporter Adjustable sont réglables selon trois hauteurs (20.5 cm, 27.5 cm et 33.7 cm) et deux largeurs. Ils sont amovibles et peuvent se rabattre latéralement.

*Position largeur étroite : 33.7 cm*

*L'ensemble Supporter inclut siège et couvercle.*



## Accessoires

Retrouvez les "Accessoires pour le Hi-Loo et le Supporter" à la page 50.

### Description

Supporter Adjustable 80303018-2

### Dimensions

Largeur totale : 62,3 cm ou 51,3 cm

Distance entre les accoudoirs :

52,5 cm ou 33,7 cm

Hauteur des accoudoirs au-dessus du siège :

20,5 cm ou 27,5 cm ou 34,2 cm

Longueur des accoudoirs : 41,5 cm

### Poids

5,8 kg

### Matériaux

Armature et accoudoirs : tube en acier époxy

Housse des accoudoirs : polypropylène

Couvercle et siège : polypropylène

Fixations : aluminium



Nettoyer le produit avec un agent nettoyant sans solvant (pH 5-9) ou une solution désinfectante à 70 %. Décontamination possible à 85 °C maximum si nécessaire.

## Accessoires pour le surélévateur fixe Etac Hi-Loo et les accoudoirs Etac Supporter



**Supports - lot de deux**  
80301030  
Pour une stabilité renforcée, notamment lors des transferts latéraux. Non compatibles avec Etac Supporter Adjustable.



**Porte-papier toilettes**  
83030001  
À fixer sous l'accoudoir.



**Barre transversale de 605 mm**  
80303034  
À fixer sur l'accoudoir. Non compatible avec Etac Supporter Adjustable.



**Fixation pour sonnette d'alarme**  
80303027



**Kit de fixation**  
80301052  
Aide pour le montage sur la cuvette lorsque l'espace est limité.



**Kit de réglage**  
80304002  
Augmente le nombre d'encoches de fixation. Non compatible avec le siège Hi-Loo sans accoudoirs.



# Accoudoir de toilettes Etac OptimaL

Accoudoir fonctionnel et élégant.

## Combinaison astucieuse de fonctionnalité et de simplicité

Etac OptimaL est un accoudoir mural élégant. Le pied assure la stabilité et la petite fixation murale permet de monter l'accoudoir à proximité des toilettes. OptimaL reste plié en toute sécurité et se déplie facilement à l'aide de la poignée.



## Accessoire



Porte-papier toilettes  
83030001

### Description

OptimaL (l'unité) 80303006

### Dimensions

Longueur déplié : 73,5 cm  
Distance sol-accoudoir déplié : 80 cm  
Hauteur totale replié contre le mur : 149 cm  
Support mural : 10,4 cm x 11 cm

### Matériaux

Support mural, tube des accoudoirs et pied :  
tube en acier époxy  
Détails : polypropylène

### Poids

3,1 kg



Nettoyer le produit avec un agent nettoyant sans solvant (pH 5-9) ou une solution désinfectante à 70 %. Décontamination possible à 85 °C maximum si nécessaire.

# Accoudoir de toilettes Etac Rex



## Adapté à tous les styles de salles de bain

Etac Rex est un accoudoir stable et sûr qui assiste l'utilisateur au moment d'aller aux toilettes. Intelligemment conçu, il prend très peu de place lorsqu'il est relevé. Cet accoudoir s'installe près du mur et ne fait donc pas obstacle aux déplacements. L'utilisateur peut l'atteindre et le saisir sans difficulté, du fait de sa forme coudée. L'accoudoir Rex est conçu de manière à garantir un dépliage en douceur. Il est constitué d'un matériau de grande qualité et prodigue une prise stable ainsi qu'une assistance sécurisée au moment où l'utilisateur en a véritablement besoin.

## Un soutien personnalisé

Rex existe en trois longueurs, avec ou sans pied d'appui. Sélectionnez le modèle selon vos besoins et selon la configuration de votre salle de bain. Avec le pied d'appui, le poids maximal toléré de l'utilisateur est de 150 kg.

L'accoudoir Etac Rex se fixe facilement au mur et se fond dans le décor de votre salle de bain.



Etac Rex existe en trois longueurs, avec ou sans pied d'appui.

### Accoudoir de toilettes Rex (l'unité)

- 60 cm	81705010
- 70 cm	81705020
- 70 cm, avec pied d'appui	81703030
- 85 cm	81705040
- 85 cm, avec pied d'appui	81705050

### Poids

60 cm : 2,7 kg.  
70 cm : 2,9 kg.  
85 cm : 3,3 kg.  
Pied d'appui : 0,7 kg.

### Matériaux

Aluminium, polyuréthane, plastique ABS, polypropylène.  
Pied d'appui : aluminium, polyamide, TPE, acier inoxydable.

### Couleur unique

Blanc et gris volcan.

### Charge maximale

Etac Rex 60/70 cm : 135 kg.  
Etac Rex 85 cm : 100 kg.  
Avec pied d'appui : 150 kg.



Nettoyer le produit avec un agent nettoyant sans solvant (pH 5-9) ou une solution désinfectante à 70 %. Décontamination possible à 85 °C maximum si nécessaire.

## Caractéristiques



### Prise confortable

La prise est naturelle et stable grâce à la forme triangulaire de l'accoudoir.



### Facile à nettoyer

Grâce à ses surfaces lisses, l'accoudoir est à la fois élégant et facile à nettoyer.



### Stable et sûr

Une conception et des matériaux de qualité garantissent la sécurité de l'utilisateur. L'accoudoir Etac Rex peut être équipé d'un pied d'appui pour supporter jusqu'à 150 kg.



### Conception intelligente

Les accoudoirs occupent une place minimale lorsqu'ils sont relevés. Leur forme coudée permet de les atteindre, de les saisir et de les rabattre aisément.



## Accessoires



### Porte-papier toilettes

Porte-papier toilettes en acier inoxydable fixé sur l'accoudoir.

81706001



### Kit de vis

Pour montage sur des murs en béton, en contreplaqué ou en bois.

Kit de vis Rex -  
T6S 8 x 80 DIN 571 A2

81706004



### Panier de rangement

Panier en maille polyester attaché à l'accoudoir.


81706003

# Accoudoir de toilettes Etac Optima

Pour une prise ferme et confortable.

## Accoudoir de toilettes Etac Optima

L'accoudoir Etac Optima se caractérise par une extrémité arrondie, douce au toucher, qui offre une prise agréable. Sur le pied d'appui, un embout réglable assure une adhérence au sol parfaite. La large plaque murale se fixe solidement au mur.

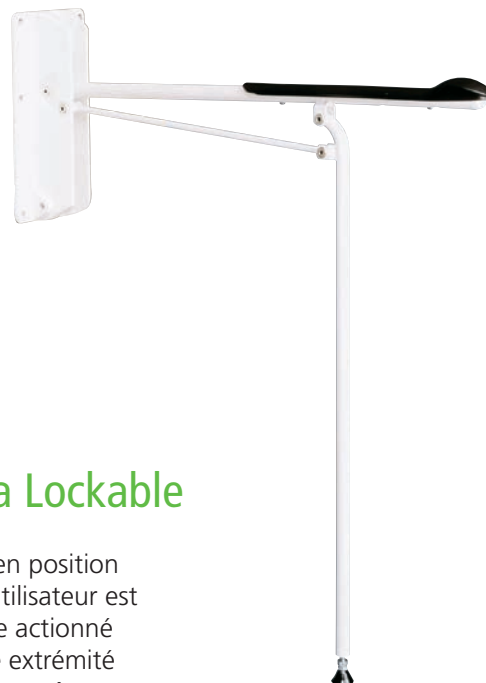

## Accoudoir de toilettes Etac Optima Lockable

L'accoudoir Etac Optima Lockable peut être verrouillé en position dépliée ou repliée. Il fournit un appui stable lorsque l'utilisateur est debout. Le mécanisme de verrouillage unique peut être actionné aisément d'une seule main. L'accoudoir est doté d'une extrémité arrondie, douce au toucher, pour une prise confortable et sûre.



*Les deux modèles Optima prévoient des solutions de montage adaptées à la plupart des situations.*

### Description

Optima (l'unité)	80303001
Optima Lockable (l'unité)	80303004
Optima Lockable, allongé (l'unité)	80303007

### Dimensions

Longueur des accoudoirs : 71,5 cm  
Longueur de l'accoudoir allongé : 91,5 cm  
Distance sol-accoudoirs : 80 cm  
Hauteur maximale replié contre le mur : 147,5 cm  
Support mural : 16,5 cm x 30,4 cm

### Poids

2,4 kg  
Allongé : 3,34 kg

### Matériaux

Support mural : aluminium revêtu de peinture en poudre  
Tube des accoudoirs et pied d'appui : acier époxy  
Housse des accoudoirs : polypropylène



Nettoyer le produit avec un agent nettoyant sans solvant (pH 5-9) ou une solution désinfectante à 70 %. Décontamination possible à 85 °C maximum si nécessaire.


## Accessoires



**Fixation pour sonnette d'alarme**  
80303027  
Convient pour Optima et Optima Lockable.



**Extension**  
10 cm : 80303030  
20 cm : 80303031  
30 cm : 80303032  
Convient pour Optima et Optima Lockable.

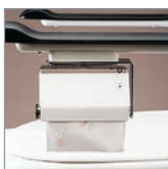

**Porte-papier toilettes**  
83030001  
Convient pour Optima et Optima Lockable.



**Colonne verticale**  
80303028  
Pour fixation au sol.  
Hauteur des accoudoirs : 80 cm  
Convient pour Optima et Optima Lockable.



**Pied d'appui**  
80303040  
Pour réduire la pression sur les murs.  
Compatible avec Optima Lockable  
uniquement.





Pour plus d'informations  
sur notre garantie de 5 ans,  
consultez également  
le site [www.etac.com](http://www.etac.com).





# Bain

Le rituel du bain participe à notre bien-être. Etac fournit des solutions procurant une grande sensation de confort et de sécurité.

Ces produits sont utilisés dans des environnements humides où la durabilité et la qualité sont des facteurs clés. Tous nos produits sont conçus dans des matériaux durables qui résistent aux pressions, c'est pourquoi nous les garantissons 5 ans.

# Planche de bain Etac Rufus Plus

## Design sûr et robuste

La planche de bain Etac Rufus Plus supporte jusqu'à 200 kg. Les tubes en aluminium intégrés garantissent la stabilité et la charge. Les butées d'arrêt s'ajustent en fonction de la largeur de la baignoire.

## Accessoire



Poignée d'appui  
81302023



La planche de bain Rufus Plus se décline en deux longueurs.

### Description

Planche de bain Rufus Plus, 68 cm :  
81202001  
Planche de bain Rufus Plus, 73 cm :  
81202002

### Matériaux

Polypropylène avec tube en aluminium intégré

### Poids

68 cm : 1,8 kg  
73 cm : 2,1 kg

### Dimensions

Longueur : 68/73 cm  
Largeur : 30 cm  
Épaisseur : 2,8 cm



Nettoyer le produit avec un agent nettoyant sans solvant (pH 5-9) ou une solution désinfectante à 70 %. Décontamination possible à 85 °C maximum si nécessaire.

# Planche de bain Etac Fresh

Allie confort et sécurité.

## L'originale

Le design unique d'Etac Fresh a fixé la norme des planches de bain. Son extrémité avant, placée sur le côté extérieur de la baignoire, est large pour un soutien maximal lors des transferts. La partie centrale, plus étroite, confère un accès pour l'hygiène intime. La planche Fresh est disponible en deux longueurs pour s'adapter aux différentes largeurs de baignoire.

## Montage sécurisé

Le montage des butées d'arrêt est simple et sûr grâce à la clé de montage plastique fournie. Quatre supports souples fixés sur les butées maintiennent la planche de bain en place sur la baignoire.



*La planche Etac Fresh dispose d'un espace ingénieux pour le savon et le shampoing, à côté de la poignée.*

## Caractéristiques



### Butée d'arrêt

Les butées d'arrêt sont ajustables et se fixent solidement, sécurisant ainsi les transferts.

## Accessoire



### Poignée d'appui

81600040

La poignée assure une prise sûre et confortable.

### Description

Fresh, 69 cm	81600011
Fresh, 74 cm	81600021
Fresh, 69 cm avec poignée	81600014
Fresh, 74 cm avec poignée	81600024
Fresh, 69 cm avec poignée dans emballage individuel	81600114

### Dimensions

Longueur : 69 ou 74 cm  
Largeur : 36 – 27 – 30 cm  
Épaisseur : 4 cm  
Réglage des butées d'arrêt :  
Fresh 69 cm : 63,6 cm max., 39 cm min.  
Fresh 74 cm : 68,6 cm max., 43,2 cm min.

### Matériaux

Polypropylène  
Butées d'arrêt : polypropylène avec surface en TPE

### Poids

Fresh 69 cm : 2,1 kg  
Fresh 74 cm : 2,3 kg



Nettoyer le produit avec un agent nettoyant sans solvant (pH 5-9) ou une solution désinfectante à 70 %. Décontamination possible à 85 °C maximum si nécessaire.

# Chaise de bain Etac Rufus

## Assise confortable et sûre

La chaise de bain Etac Rufus est munie d'une assise confortable et sûre de 19 cm, placée sous la partie supérieure de la baignoire. Le dossier assure un confort optimal et garantit la sécurité. Elle existe en deux longueurs.



### Description

Chaise de bain Rufus, 70 cm 81506011  
Chaise de bain Rufus, 74 cm 81506012

### Dimensions

Surface totale du siège : 41 cm x 40 cm  
Largeur totale : 70 cm x 30,4 cm

### Poids

3,2 kg

### Matériaux

Armature : tube en acier époxy  
Siège : polypropylène avec tube en aluminium intégré



Nettoyer le produit avec un agent nettoyant sans solvant (pH 5-9) ou une solution désinfectante à 70 %. Décontamination possible à 85 °C maximum si nécessaire.

# Tabouret de salle de bain Etac Stapel

## Un tabouret de salle de bain fiable

Etac Stapel est un tabouret solide qui peut être utilisé dans de nombreuses situations. Il est idéal pour entrer et sortir du bain ou comme marchepied pour les toilettes. La partie supérieure se déclipse aisément pour pouvoir être nettoyée.



*Le tabouret Stapel sécurise l'accès à la baignoire et la sortie du bain.*

## Accessoire



### Pied télescopique

5-18 cm 83010002  
4 pièces  
5-10,5 cm 83010001  
4 pièces

### Description

Stapel 81204002

### Dimensions

Hauteur totale : 18 cm  
Encombrement : 48,5 cm x 49 cm  
Surface de la marche : 38 cm x 43 cm

### Poids

3 kg

### Matériau

Armature : tube en acier époxy  
Siège : polypropylène



Nettoyer le produit avec un agent nettoyant sans solvant (pH 5-9) ou une solution désinfectante à 70 %. Décontamination possible à 85 °C maximum si nécessaire.





Pour plus d'informations  
sur notre garantie de 5 ans,  
consultez également  
le site [www.etac.com](http://www.etac.com).



## Aides médicales pour la vie quotidienne

Les tâches quotidiennes primordiales, qui nécessitent de prendre des objets, de pivoter, de se nourrir, d'écrire et de s'habiller peuvent s'avérer difficiles pour les personnes ayant peu de force ou de mobilité au niveau des bras ou des jambes.


Nos produits d'aide à la vie quotidienne visent à soulager la pression et la tension exercées sur les muscles et les articulations, pour que l'utilisateur puisse continuer à accomplir ces tâches importantes en toute autonomie.

# Soins corporels avec Etac Beauty

Les produits Beauty facilitent la toilette et massent la peau et le cuir chevelu également.

## Brosses pour le corps et pour le dos Etac Beauty

Les brosses pour le corps et pour le dos Beauty ont été élaborées pour que l'utilisateur puisse atteindre sans problème toutes les parties de son corps et les laver. Les gants de toilette n'absorbent pas l'eau ; ils ne s'alourdissent pas et restent légers, même mouillés. Les poignées ovales sont dotées d'une surface qui assure une prise ferme. Les gants de toilette sont lavables en machine et peuvent être remplacés.

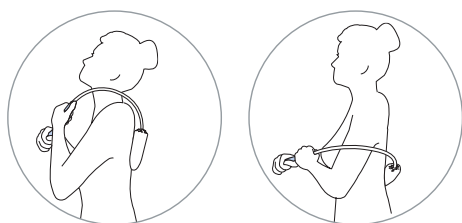

*La brosse pour le corps Etac Beauty est courbée pour mieux atteindre toutes les parties du corps.*

*La brosse pour le dos Etac Beauty permet une prise avec les deux mains.*

## Brosse à shampoing Etac Beauty

La brosse à shampoing Beauty remplace les doigts pour appliquer le shampoing et masser le cuir chevelu. Le manche et la poignée ont la même forme que la brosse : par conséquent, l'utilisateur peut atteindre plus facilement la tête sans exercer de tension au niveau des mains, des épaules ou des bras. Elle sert également de gratte dos.



### Description

Brosse pour le corps Beauty	80210076
Gant de toilette de rechange pour brosse pour le corps (lot de 2)	80210103
Brosse pour le dos Beauty	80210080
Gant de toilette de rechange pour brosse pour le dos (lot de 2)	80210104
Brosse à shampoing Beauty	80210078

### Longueur

Brosse pour le corps Beauty	: 38 cm
Brosse pour le dos Beauty	: 77 cm
Brosse à shampoing Beauty	: 36 cm

### Poids

Brosse pour le corps Beauty	: 112 g
Brosse pour le dos Beauty	: 203 g
Brosse à shampoing Beauty	: 112 g

### Matériaux

Polypropylène et TPE  
Gant de toilette : coton avec doublure en polyéthylène

### Entretien


Les gants de toilette Beauty peuvent être lavés en machine à 60 C.






## Peignes et brosses à cheveux Etac Beauty

Le peigne et la brosse à cheveux Beauty existent en deux longueurs. Le modèle le plus court est recommandé si l'utilisateur peut atteindre son oreille. Le modèle le plus long s'adresse aux utilisateurs qui ne peuvent atteindre que leur épaule. Le peigne et la brosse à cheveux sont tous deux courbés, optimisant le confort et le contrôle lors du coiffage des cheveux.

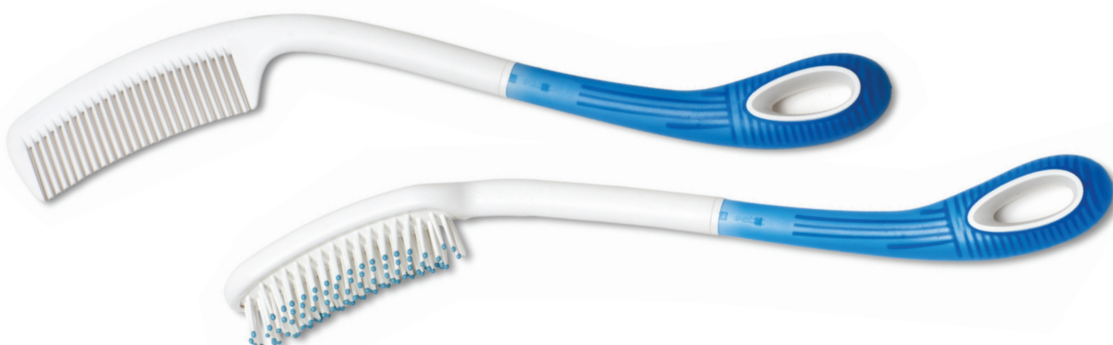

## Manche multi-usages Etac Beauty

Le manche multi-usages Beauty tient bien dans la main et sert à toute une palette d'applications. Vous pouvez par exemple y insérer une lime à ongles pour réaliser une manucure express. L'extrémité large du manche peut être utilisée avec une brosse à dents ou un rasoir.

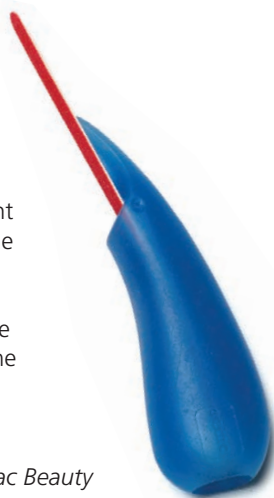

*Le manche multi-usages Etac Beauty a une surface lisse et douce. Fourni avec 3 limes à ongles.*

### Description

Brosse à cheveux Beauty	80210072
Brosse à cheveux Beauty longue	80210074
Peigne Beauty	80210068
Peigne Beauty long	80210070
Manche multi-usages Beauty	80210082

### Longueur

Brosse à cheveux Beauty	: 29/37 cm
Peigne Beauty	: 30/37 cm
Manche multi-usages Beauty	: 11 cm

### Poids

Brosse à cheveux Beauty	102/112 g
Peigne Beauty	80/90 g
Manche multi-usages Beauty	: 45 g

### Matériaux

Polypropylène et TPE  
Lime à ongles : lime-émeri

### Conception

Ergonomidesign  
La conception des produits Beauty est déposée.



# Pince à papier toilettes Etac Torkel

La toilette intime est hautement prioritaire pour chacun.

## Une plus grande intimité

Les utilisateurs qui ont du mal à saisir des objets ou à se mouvoir peuvent utiliser la pince Torkel pour attraper du papier toilettes, un gant de toilette ou une petite serviette. La pince Torkel peut être désinfectée et immergée dans de l'eau bouillante.


Mode d'emploi de la pince à papier toilettes Torkel :



1. Déchirez un morceau de papier toilettes (environ 40 cm). Ouvrez la pince en pressant le manche, puis glissez le papier entre les pinces.



2. Enroulez le papier lâchement autour de la pince de manière à ce qu'il en recouvre la pointe.

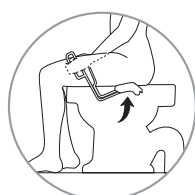

3. Essayez-vous.



4. Ouvrez la pince et secouez-la pour que le papier utilisé tombe.



### Description

Pince à papier toilettes Torkel

### N° d'article

80304001

### Dimensions

Longueur : 33 cm

### Matériau

Plastique polyamidique

### Poids

100 g

### Conception

Designkonsulterna




Nettoyer le produit avec un agent nettoyant sans solvant (pH 5-9) ou une solution désinfectante à 70 %. Décontamination possible à 85 °C maximum si nécessaire.




## Pinces de préhension Etac Aktiv

Les pinces de préhension Etac Aktiv sont disponibles en plusieurs modèles. Elles sont légères et leur manche ergonomique permet d'atteindre et d'attraper des objets. L'ouverture du bec est très large, ce qui n'empêche pas la saisie de petits objets. L'une des caractéristiques exclusives de ces pinces est la possibilité de tourner le bec. Les pinces peuvent facilement passer de la position horizontale à la position verticale. Sur tous les modèles, un aimant est présent dans le manche pour la saisie de petits objets métalliques.

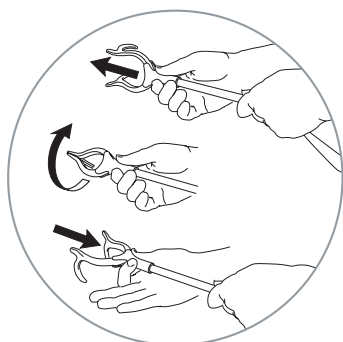

*Le bec se règle sur deux positions.*

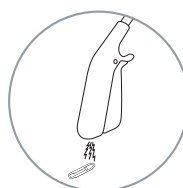

*Sur tous les modèles, un aimant est présent dans le manche pour la saisie d'objets métalliques.*

## Pinces de préhension Etac Aktiv courtes et longues

Le manche de la pince de préhension Etac Aktiv est légèrement coudé pour utiliser la force de la main et procurer une bonne préhension. La force de la main suffit à donner une prise efficace. Le manche est pourvu d'une base d'appui pour l'index afin d'augmenter la précision. Le bec est entièrement recouvert de caoutchouc résistant à l'usure, ce qui assure un maximum de frottement tout en minimisant la force à appliquer.

*La pince de préhension Aktiv existe en 5 longueurs. Les modèles longs sont recommandés pour une utilisation en position debout.*



*Vous pouvez utiliser la pince de préhension Aktiv de 45 cm pour attraper des objets au sol lorsque vous êtes assis.*

## Pince de préhension Etac Aktiv avec manche « Power Grip » et crochet

Cette pince de préhension Aktiv avec manche coudé à 90° et repose avant-bras est destinée aux personnes dont la capacité de levage est très limitée. Le bec est équipé de crochets pour rapprocher ou repousser des objets. La pince de préhension Aktiv avec crochet dispose également de becs rotatifs et d'un aimant pour la saisie d'objets métalliques de petite taille.



*Le manche coudé permet à l'utilisateur de garder le poignet droit et de favoriser la prise. Le repose avant-bras assure une préhension stable et efficace.*




*Pince de préhension Aktiv avec manche « Power Grip » et crochet.*

## Pince de préhension Etac Aktiv avec crochet

La pince de préhension Etac Aktiv avec crochet aide les utilisateurs à s'habiller et à se déshabiller. Elle est aussi légère que les autres pinces de préhension Aktiv et possède les mêmes fonctionnalités.



*La pince de préhension Aktiv avec crochet est un outil exemplaire pour atteindre des objets et se vêtir.*

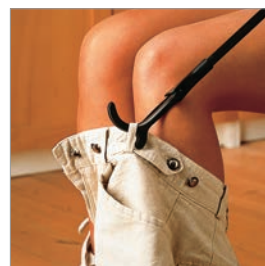

*Le caoutchouc à l'intérieur des crochets assure une bonne prise.*

### Description

Description	N° d'article
Pince de préhension Aktiv de 45 cm	80505004
Pince de préhension Aktiv de 60 cm	80505007
Pince de préhension Aktiv de 70 cm	80505003
Pince de préhension Aktiv de 80 cm	80505008
Pince de préhension Aktiv de 90 cm	80505009
Pince de préhension avec manche « Power Grip » et crochet, 60 cm	80505005
Pince de préhension avec crochet, 45 cm	80505006

### Capacité de levage

Les pinces de préhension ne doivent pas être utilisées pour soulever des charges de plus de 2 kg.

### Poids

Pince de préhension de 45 cm	: 111 g
Pince de préhension de 70 cm	: 128 g
Pince de préhension avec manche « Power Grip »	: 139 g
Pince de préhension avec crochet	: 117 g

### Matériaux

Manche et bec : polycarbonate/ABS  
Repose avant-bras et support bec : polyamide  
Tube : aluminium

### Conception

Ergonomidesign

# Enfile-bas Etac Socky

## Enfile-boutons Etac Butler

Lorsque la douleur restreint la mobilité ou quand la motricité fine est réduite, atteindre ses pieds ou attacher de petits boutons peut être un véritable défi. Ces problèmes sont souvent complexes et il n'existe pas de solution universelle. Quelques aides possibles sont décrites ci-dessous : trois enfile-bas et deux enfile-boutons.



*Les crochets en plastique qui se trouvent sous le tissu en nylon empêchent la chaussette de bouger, facilitant sa mise en place.*

### Enfile-bas Etac Socky court

L'enfile-bas Socky court s'utilise idéalement pour les chaussettes courtes ou montantes, y compris les chaussettes de contention. Il est composé d'une base en plastique avec deux crochets sous une étoffe de nylon pré-pliée.

#### Mode d'emploi de l'enfile-bas Etac Socky court

Il suffit d'enfiler votre chaussette sur l'enfile-bas Socky jusqu'à ce que le haut de celle-ci recouvre les crochets. Placez ensuite le cordon derrière votre mollet et tirez. L'enfile-bas court Socky glisse avec aisance autour de votre pied et de la partie inférieure de votre jambe et la chaussette est impeccablement positionnée (voir la vidéo sur [www.etac.com](http://www.etac.com)).



*La poignée de l'enfile-bas Socky long est d'une aide précieuse pour les utilisateurs qui ont peu de force ou de motricité au niveau des mains et des bras.*

### Enfile-bas Etac Socky long

L'enfile-bas Socky long est la solution idéale si vous n'avez pas beaucoup de force dans les mains, si vous éprouvez des difficultés à vous déplacer ou si vous devez réduire le frottement entre la chaussette et le plancher/la moquette. Il peut être utilisé pour revêtir des chaussettes courtes ou montantes de même que des collants. Il s'agit d'une longue feuille en plastique située sous une étoffe de nylon pré-pliée, avec une poignée sur la partie supérieure.

#### Mode d'emploi de l'enfile-bas Etac Socky long

La chaussette est placée autour de l'enfile-bas Socky et tirée vers le haut. La poignée sert à tirer l'enfile-bas dans la même direction, tandis que la feuille en plastique glisse sur le sol et maintient la chaussette en place. Pour les collants, utilisez deux enfile-bas Socky longs reliés grâce au dispositif de connexion Etac Socky.

Ce modèle Socky permet également au soignant d'aider l'utilisateur à enfiler des bas de contention.



## Enfile-bas Etac Socky pour bas de contention

Cet enfile-bas est adapté à plusieurs longueurs et à différents types de bas de contention. Il est constitué de deux longs fragments d'étoffe de nylon reliés par du velcro. Chaque partie dispose d'une grande poignée qu'il suffit de tirer pour enfiler le bas.


### Mode d'emploi de l'enfile-bas Socky long

Placez le bas de contention sur l'enfile-bas Socky. Les parties en tissu se séparent lorsque vous tirez le bas vers le haut. Le soignant est ainsi en mesure d'assister l'utilisateur.

## Enfile-boutons Etac Butler

Les enfile-boutons Butler se déclinent en deux modèles. Le modèle avec prise sphérique peut être employé pour les boutons de petite et de grande tailles, mais aussi pour les fermetures à glissière. Quant au modèle à manche long, il peut être utilisé pour tous types de boutons, même pour les boutons métalliques comme ceux des jeans.

La prise sphérique épouse bien la paume de la main.

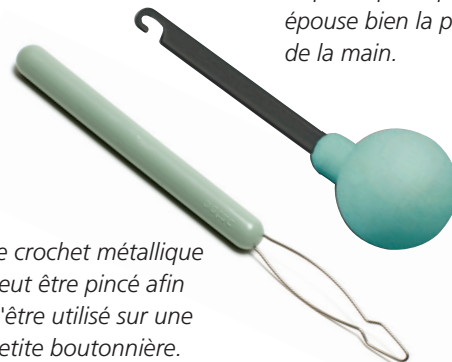

Le crochet métallique peut être pincé afin d'être utilisé sur une petite boutonnière.



Voir la vidéo de démonstration sur [etac.com](http://etac.com)  
Mode d'emploi d'Etac Socky

#### Description

Description	N° d'article
Enfile-bas Socky court	80601002-2
Enfile-bas Socky long	80601001-2
Dispositif de connexion Socky	80601021
Enfile-bas Socky pour bas de contention	80601003-2
Enfile-boutons Butler avec prise sphérique	80602001
Enfile-boutons Butler à manche long	80602004

#### Longueur

Enfile-bas Socky court, 40 cm
Enfile-bas Socky long, 60 cm
Enfile-bas Socky pour contention : 100 cm
Enfile-boutons Butler avec prise sphérique : 13 cm
Enfile-boutons Butler à manche long : 22 cm

#### Brevet

Les enfile-bas Socky court et long sont brevetés.

#### Poids

Enfile-bas Socky court : 94 g
Enfile-bas Socky long : 146 g
Enfile-bas Socky pour bas de contention : 90 g
Enfile-boutons Butler avec prise sphérique : 25 g
Enfile-boutons Butler à manche long : 18 g

#### Matériaux

Enfile-bas Socky :  
Tissus : polyamide  
Composants plastiques : polypropylène

Enfile-boutons Butler :  
Manche : polystyrène  
Enfile-boutons Butler avec prise sphérique - tige :  
métal avec revêtement époxydique  
Enfile-boutons Butler à manche long - crochet : fil galvanisé

#### Conception

HM Center






# Stylo Etac Contour et poignée tourne-boutons Etac Uni

À un moment ou à un autre, nous sommes tous amenés à prendre quelques notes ou à signer un document. Nous devons aussi quotidiennement tourner des boutons ou actionner des poignées pour ouvrir des portes ou des placards ou encore allumer ou éteindre des lampes.

## Stylo Etac Contour


Le stylo Contour a été spécifiquement conçu pour que les personnes qui ont une capacité de préhension limitée puissent écrire. Grâce à sa zone de préhension étroite, le stylo repose confortablement entre le pouce et l'index. Le pouce stabilise la prise et écrire devient possible sans trop d'efforts. L'encre fluide et légère atténue la pression sur les doigts.

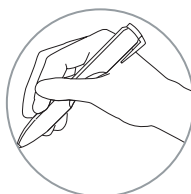

*Le stylo Contour repose confortablement entre le pouce et l'index.*

## Poignée tourne-boutons Etac Uni

La poignée tourne-boutons Uni simplifie certaines tâches du quotidien, comme ouvrir des portes, tourner de petits boutons et actionner des poignées. La poignée ergonomique et confortable exerce une pression adéquate sur le bouton pour que celui-ci tourne. Les picots hexagonaux de couleur rouge offrent une bonne prise autour du bouton.

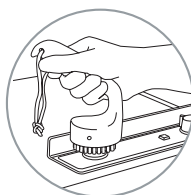

*La poignée tourne-boutons Uni délivre une prise ferme et confortable au poignet et soulage les articulations des doigts.*

### Description

Stylo Contour  
Poignée tourne-boutons Uni

### N° d'article

80701001  
80503003

### Poids

Stylo Contour : 26 g  
Poignée tourne-boutons Uni : 84 g

### Matériaux

Stylo Contour : ABS  
Poignée tourne-boutons Uni : ABS.  
Broches : polyamide

### Conception

Stylo Contour : Designkonsulterna  
Poignée tourne-boutons Uni : Ergonomidesign

# Couteaux ergonomiques Etac Relieve

Les couteaux Relieve sont constitués d'un manche coudé et d'une lame aiguisée qui rendent la découpe plus facile.

Le manche : l'angle permet à l'utilisateur de maintenir son poignet droit et la forme ovale du manche garantit une prise stable. La partie supérieure est légèrement incurvée afin que le pouce puisse être positionné confortablement.

La lame : la lame est très aiguisée, pour une découpe moins complexe. Afin d'éviter que la main entre en contact avec la nourriture, elle est située plus bas que le manche.

## Couteau coudé à découper Etac Relieve

La lame est suffisamment longue pour découper des aliments et du pain. L'angle du manche est conçu de sorte que l'utilisateur puisse tenir son poignet droit lorsqu'il découpe des aliments debout.



*Couteau à découper Relieve*

## Couteaux de table coudés Etac Relieve

Il existe deux modèles de couteaux de table : un couteau pour les mains de taille normale et un couteau pour les petites mains ou pour mains d'enfants. Ils maintiennent tous le poignet droit en cas de découpe à hauteur de table.



*Couteaux de table Relieve*

### **Description**

Couteau à découper Relieve

Couteau de table Relieve

Couteau de table Relieve pour petites mains

### **N° d'article**

80501101

80402101

80402102

### **Poids**

Couteau à découper Relieve : 75 g

Couteaux Relieve : 72 g

Couteau Relieve pour petites mains : 37 g

### **Matériaux**

Lame : acier inoxydable

Couteau à découper Relieve : manche en polyamide

Couteaux de table Relieve : manche en plastique polyamidique

### **Entretien**

Adaptés au lave-vaisselle

### **Conception**

Ergonomidesign

## Couteau de cuisine Etac Relieve

Comparés aux couteaux de cuisine ordinaire, ces couteaux optimisent la position des mains et des poignet par une prise fermée unique. La main est placée à l'intérieur du manche pour que le couteau reste parfaitement en équilibre. Cette position du bras et de la main permet avec un minimum d'effort, d'augmenter la force appliquée de la découpe.



## Coupe-fromage Etac Relieve

Le coupe-fromage Relieve aide à découper du fromage, des concombres ainsi que d'autres légumes.

Il convient à toutes les tailles de main puisqu'il suffit de déposer son pouce sur la partie supérieure du manche. La partie inférieure du manche est coudée pour éviter tout contact avec le fromage. La lame à trancher est « ondulée » de manière à ce que le fromage ou les légumes puissent s'en détacher.



Description	N° d'article
Couteau de cuisine Relieve à dents	80501001
Coupe-fromage Relieve	80502001

**Poids**  
Couteau de cuisine à dents : 161 g  
Coupe-fromage Relieve : 69 g

**Matériaux**  
Couteau de cuisine et coupe-fromage Relieve  
Manche : polypropylène  
Lame : acier inoxydable

**Entretien**  
Adaptés au lave-vaisselle

**Conception**  
Ergonomidesign




# Planche de préparation culinaire Etac Fix

## Planche à découper Etac Cut

Que vous utilisiez vos deux mains ou une seule main, les outils ci-dessous sont indispensables pour découper, fouetter ou râper.

### Planche de préparation culinaire Etac Fix

La planche de préparation Fix est stable sur ses quatre tampons antidérapants ou sur ses quatre pieds à ventouses inclus. Les mâchoires permettent de maintenir en place un bol, une râpe ou un morceau de nourriture. Une petite plaque à pointes, servant à maintenir les morceaux de nourriture plus petits, complète le tout. Cette plaque peut être retirée ou positionnée de façon à ce que les pointes soient orientées vers le bas en vue d'obtenir une surface plane.

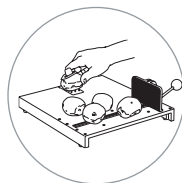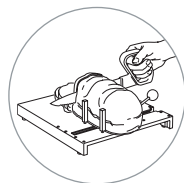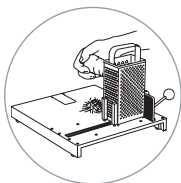

### Planche à découper Etac Cut

Avec la planche à découper Cut, le pain, le pâté, les steaks ou n'importe quel autre aliment se coupe aisément. Pour modifier l'épaisseur des tranches, il suffit de tourner la barre transversale.

Le couteau se glisse entre les guides verticaux, pour une découpe droite et en toute sécurité. Il s'agit d'une aide inestimable pour les malvoyants.



#### Description

Planche de préparation culinaire Fix  
Planche à découper Cut

#### N° d'article

80501004  
80501005

#### Poids

Planche de préparation Fix : 1,3 kg  
Planche à découper Cut : 415 g

#### Matériaux

Planche de préparation culinaire Fix : Hachoir : polystyrène  
Composants métalliques : acier inoxydable  
Bec : PC/ABS

Planche à découper Cut : Polystyrène

#### Entretien

Adaptées au lave-vaisselle

#### Conception

Ergonomidesign  
La planche de préparation Fix est brevetée.



# Couverts Etac Light

Les couverts Etac Light ainsi que l'assiette et les verres Tasty transforment la prise des repas en une expérience plus agréable pour les personnes souffrant de problèmes articulaires. Différents modèles, tous légers, sont disponibles.

Tous les couverts Light disposent d'un manche fonctionnel dont la forme rend la prise stable et confortable et qui visent à compenser la mobilité manuelle réduite des utilisateurs. Chaque forme de couverts à une utilisation spécifique.

## Couverts à manche épais Etac Light

Les couverts à manche épais Light sont conçus pour une prise en main détendue. Leur forme ovale épaisse et leur légèreté ont pour effet d'atténuer la pression sur les doigts.

La cuillère à soupe possède un manche légèrement plus long et plus fin, qui facilite la prise entre le pouce et l'index, manipulation la plus courante avec ce type de cuillère. Pour faciliter la découpe, le manche du couteau est incliné pour soulager la pression de l'index. Il est également doté d'une lame aiguisée spéciale.



## Cuillère coudée Etac Light

Les cuillères coudées Light sont légères et ont été pensées pour compenser le manque de force dans les mains des utilisateurs au cours des repas. Leur long manche en acier inoxydable peut être plié quelque peu afin de compenser le manque de mobilité au niveau du poignet.

*Ces cuillères coudées se déclinent en versions pour droitier et pour gaucher.*



### Description

Fourchette Light à manche épais	80402002
Cuillère à soupe Light à manche épais	80402004
Couteau Light à manche épais	80402006
Cuillère à café Light à manche épais	80402007
Cuillère coudée Light	
– pour droitier	80403201
– pour gaucher	80403202

### Dimensions

Fourchette : 18 cm
Cuillère à soupe : 22 cm
Couteau : 21 cm
Cuillère à café : 18 cm
Cuillère coudée : 19 cm

### Poids

Fourchette : 27 g
Cuillère à soupe : 37 g
Couteau : 23 g
Cuillère à café : 30 g
Cuillère coudée : 35 g

### Matériaux

Partie métallique : acier inoxydable
Manche : plastique ABS

### Entretien

Adaptées au lave-vaisselle


### Conception

Ergonomidesign

## Couverts à manche fin Etac Light

Les manches fins procurent une prise confortable entre les doigts. Cette prise en main fonctionnelle est destinée aux utilisateurs dont la force et la mobilité sont tellement limitées qu'ils soulèvent leur main, paume vers le haut. La longueur des manches permet de ne pas devoir lever les couverts aussi haut qu'avec des manches courts.


Une prise fonctionnelle lorsque l'utilisateur n'a pas beaucoup de force.

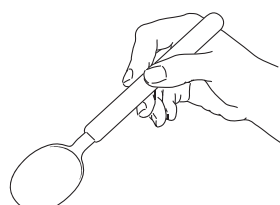

Les manches fins transforment la prise des repas en moment plus agréable pour les personnes présentant une mobilité articulaire extrêmement faible et, par conséquent, d'une capacité de préhension limitée.

## Couverts combinés Etac Light

Les couverts combinés Light se composent d'un couteau et d'une fourchette ou bien d'un couteau et d'une cuillère et sont conçus pour être maniés d'une seule main. Un côté du manche est plat, ce qui assure une prise stable lors de la découpe. L'assortiment couteau/fourchette existe pour les droitiers et les gauchers, tandis que l'assortiment couteau/cuillère est universel.

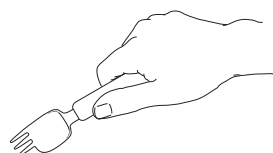

### Description

Fourchette Light à manche fin	80401003
Cuillère à soupe Light à manche fin	80401005
Couteau Light à manche fin	80401001
Cuillère à café Light à manche fin	80401007

Couverts combinés	
Couteau/cuillère Light	80403001
Couteau/fourchette Light pour droitier	80403002
Couteau/fourchette Light pour gaucher	80403003

### Dimensions

Fourchette : 21 cm
Cuillère à soupe : 21 cm
Couteau : 22 cm
Cuillère à café : 20 cm
Couverts combinés :
Couteau/fourchette : 18 cm
Couteau/cuillère : 20 cm

### Poids

Fourchette : 24 g
Cuillère à soupe : 34 g
Couteau : 21 g
Cuillère à café : 26 g

### Poids couverts combinés

Couteau/fourchette : 25 g
Couteau/cuillère : 35 g

### Matériaux

Partie métallique : acier inoxydable  
Manche : plastique ABS

### Entretien

Adaptés au lave-vaisselle

### Conception

Ergonomidesign

# Verre, gobelet et assiette Etac Tasty

La gamme Tasty comprend des produits légers au design fonctionnel et discret.

## Verre Etac Tasty

Le verre Tasty est simple à utiliser en raison de sa légèreté et de son design inspiré d'un verre à vin. Il se soulève facilement sans serrer le pied. En plaçant l'index et le pouce de chaque côté du pied, la coupe repose sur votre main sans avoir besoin de tenir le pied.



## Assiette Etac Tasty

L'assiette Tasty a un côté surélevé afin que l'utilisateur puisse prendre la nourriture sans souci d'une seule main. Elle est munie sur le dessous d'une bande en caoutchouc antidérapante. Cette assiette convient aussi pour donner de la nourriture à un patient.

## Gobelet Etac Tasty

Le gobelet Tasty est composé de 3 éléments : un récipient en plastique transparent, d'un couvercle avec bec verseur et d'un support blanc équipé d'une anse d'un côté qui évite de se brûler lorsque le liquide est chaud et d'un bord d'appui pour glisser l'index en dessous. Ce support blanc permet de tenir la tasse des deux mains. Grâce à sa structure compacte, ce gobelet occupe peu de place dans les placards.



### Description

Verre Tasty  
Assiette Tasty  
Gobelet Tasty

### N° d'article

80404001  
80404005  
80404042

### Poids

Verre : 75 g  
Assiette : 160 g  
Gobelet complet : 125 g  
Récipient : 50 g  
Anse : 60 g  
Couvercle avec bec verseur : 15 g

### Matériaux

Verre : polycarbonate  
Assiette : mélamine blanche, résistante à la chaleur  
Gobelet : polycarbonate  
Anse/couvercle avec bec verseur : polypropylène

### Entretien

Adaptées au lave-vaisselle. Conserve sa brillance s'il est lavé à la main. ATTENTION : l'assiette ne passe pas au micro-ondes.

### Capacité

Verre : 2 dl  
Gobelet : 3 dl

### Conception

Ergonomidesign



# Aides de table Etac Feed

Nos couverts alimentaires et nos gobelets sont fonctionnels tant pour la personne nourrie que pour la personne aidante. Ces produits sont adaptés aux enfants et adultes en perte d'autonomie et qui ont besoin d'être assistés.

## Couverts Etac Feed

La forme des couverts Feed permet de nourrir les personnes qui ont des difficultés à ouvrir la bouche. Avec la partie supérieure du manche, la personne aidante jouit d'une prise en main confortable et la personne nourrie est libre de saisir le manche si elle le souhaite.



Les trois modèles sont plats, avec des extrémités arrondies pour une sensation agréable en bouche.

## Cuillère réglable Etac Feed

Cette cuillère Feed s'adresse exclusivement aux enfants qui apprennent à manger seuls. Le manche « Power Grip » comporte un emplacement pour le pouce afin d'éviter que la main de l'enfant ne glisse. L'angle de la cuillère se règle à l'aide d'une petite vis. La lanière élastique est utile pour les enfants dont la capacité de préhension est encore faible.



La cuillère Etac Feed existe pour les droitiers et pour les gauchers.

## Récipient canard Etac Feed

Le récipient canard Etac Feed est réservé aux personnes qui ont besoin d'aide pour boire. Le bec verseur, entre bien en contact avec les lèvres et l'utilisateur peut ainsi boire en toute sécurité sans devoir basculer la tête en arrière. Ce récipient est transparent et gradué à 0,5 dl et 1 dl.



Description	N° d'article	Dimensions	Matériaux
Cuillère Feed	80403101	Cuillère Feed : 22 cm	Cuillère et fourchette Feed : polyester thermoplastique
Cuillère Feed pour petites mains	80403102	Cuillère Feed pour petites mains : 20 cm	Cuillère réglable Feed : polyamide blanc
Fourchette Feed	80403103	Fourchette Feed : 22 cm	Récipient canard Feed : polycarbonate
Cuillère réglable Feed		Cuillère réglable Feed : 16 cm	
coudée pour droitier :	80403301	Récipient canard Feed : hauteur, sans le bec verseur : 7 cm	
coudée pour gaucher :	80403302		
Récipient canard Feed	80404101		
<b>Capacité</b>		<b>Poids</b>	<b>Entretien</b>
Récipient canard : 1 dl		Cuillère Feed : 37 g	Adaptés au lave-vaisselle
		Cuillère Feed pour petites mains : 31 g	
		Fourchette Feed : 34 g	<b>Conception</b>
		Cuillère réglable Feed : 40 g	Ergonomidesign
		Récipient canard Feed : 40 g	

# Des possibilités infinies

Notre stratégie consiste à créer des possibilités qui se reflètent dans nos produits. Nous accordons une très grande importance à la sécurité, à la fonctionnalité, à la qualité et à la conception. Pour plus d'informations sur nos produits, consultez le site [www.etac.com](http://www.etac.com).



*Le fauteuil roulant Etac Cross 5 allie confort maximal, fonctionnalité optimale et répond à des exigences variées.*

## Fauteuils roulants Etac

Tous les fauteuils roulants Etac répondent aux besoins du plus grand nombre et tiennent compte des nécessités en matière de soins. Vous avez le choix entre plusieurs modèles, tous largement personnalisables et accompagnés d'un éventail d'accessoires. Nos fauteuils roulants garantissent à l'utilisateur qu'il bénéficiera d'un confort d'assise, d'une simplicité d'utilisation et d'une maniabilité sans précédent.

## Lève-personne et harnais Molift

Molift est notre gamme de lève-personne et de harnais de grande qualité, axée sur la sécurité, le confort et la dignité. Nous l'avons mise au point en vue de dispenser les meilleurs soins en toute sécurité, d'éviter les situations de levage de charges lourdes susceptibles de causer des blessures de dos pour le soignant et de proposer au secteur de la santé des solutions rentables.



## Transfert manuel avec Immedia

Immedia, notre gamme de produits de transfert manuel, garantit des transferts en douceur et en toute sécurité. Le design lisse de ces produits élimine les points de frottement et facilite le déplacement des charges lourdes. Le transfert se fait de manière naturelle, aisée et digne, pour le patient comme pour le soignant.

## Solutions d'amélioration du quotidien Etac

Les produits d'amélioration du quotidien d'Etac visent à soulager la tension et la pression exercées sur les muscles et les articulations, pour que l'utilisateur puisse continuer à accomplir ses tâches quotidiennes : par exemple attraper des objets, se tourner, manger, écrire et s'habiller.



## Bain et toilettes Etac

Etac fournit pour le bain et les toilettes des solutions sûres qui procurent une grande sensation de confort. Les environnements humides requièrent des produits de qualité et durables. Tous nos produits sont fabriqués à partir de matériaux résistant aux contraintes et ont une longue durée de vie.

## Solutions pédiatriques R82

L'acquisition d'une certaine indépendance est sans conteste essentielle au développement de l'enfant. Cela vaut aussi pour les enfants moins habiles. Comme tout le monde, ils veulent pouvoir faire les choses seuls pour découvrir qui ils sont. Avec les solutions pédiatriques complémentaires R82 Etac, nous proposons une large gamme d'aides à l'assise, à la verticalisation et à la marche à l'attention des enfants et des adolescents.



Pour en savoir plus sur nos solutions :

[www.etac.com](http://www.etac.com)



« Chacun a le droit de pouvoir profiter d'une existence autonome et libre de contraintes et de poursuivre ses rêves, quelle que soit sa condition physique. »

Afin d'être informés des dernières nouveautés et des mises à jour de nos produits, consultez le site [www.etac.com](http://www.etac.com).

## France Rehab

ZA du Serroir  
54690 Lay-Saint-Christophe  
Tél.: 03 83 22 20 65  
Fax : 03 83 31 57 83  
[info@france-rehab.fr](mailto:info@france-rehab.fr)  
[www.france-rehab.fr](http://www.france-rehab.fr)

  
Creating Possibilities